

PocketChem-tulostin

Käyttöopas

Kiitos, kun ostit PocketChem -tulostimen.

Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä.

Katso tarvittaessa lisätietoja PocketChemin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Jos sinulla on ollut tai olisi voinut olla laitteeseen liittyvä vakava vaaratilanne, ilmoita siitä suoraan valmistajalle, valtuutetulle edustajalle tai paikalliselle säädäntöviranomaiselle.

Käyttötarkoitus

PocketChem-lämpötulostin on tarkoitettu käytettäväksi PocketChem BA:n (PA-4140) ja PocketChem UA:n (PU-4010) kanssa, joilla tehdään useiden fysiologisten ominaisuuksien laadullisia, puolikvantitatiivisia ja/tai kvantitatiivisia mittauksia. Vain *in vitro* -diagnostiikkakäyttöön ja ammattikäyttöön. Instrumenttia ei ole tarkoitettu potilaiden vieritestaukseen.

Tämä tuote on EMC-standardin IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013) mukainen.

Päästöluokka: CISPR 11 Luokka A

Tämä instrumentti on lääkinällinen IVD-instrumentti.



Tämä tuote on asetuksen (EU) 2017/746 mukainen.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan A digitaalisen laitteen rajoja FCC-normien osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja aiheuttaa haitallisia radioliikennehäiriöitä, jos laitetta ei asenneta ja käytetä käyttöoppaan mukaisesti. Tämän laitteen käyttö aiheuttaa asuinalueella todennäköisesti haitallisia häiriöitä, ja käyttäjän on korjattava häiriöt omalla kustannuksellaan.

Sähkömagneettinen ympäristö tulisi arvioida ennen laitteen käyttöä. Älä käytä tätä laitetta voimakasta sähkömagneettista säteilyä aiheuttavien lähteiden lähellä, koska nämä saattavat häiritä oikeanlaista toimintaa.



Tulostin on liitettävä instrumenttiin käyttöä varten. Näin ollen myös tulostin voi altistua patogeenisien mikro-organismien tartunnalle. Ole varovainen, kun liität, irrotat ja varastoit tulostimen estääksesi altistumista patogeenisille mikro-organismeille.

Symbolit

Tässä ohjekirjassa ja instrumentin merkinnöissä käytetään seuraavia symboleja, joiden avulla huomiosi kiinnitetään tiettyihin kohtiin.


■ Turvallisuutta koskevia tietoja



Noudata tässä kuvattuja ohjeita, jotta vältät altistumisen patogeenisille mikro-organismeille.

Pakkauksesta purkaminen

Pakkauksen tulisi sisältää alla luetellut komponentit. Tarkista, että kaikki komponentit löytyvät pakkauksesta. Jos jotain puuttuu tai jokin on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

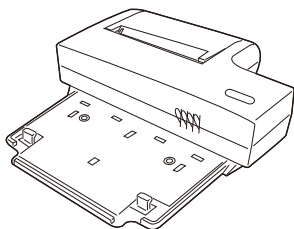

■ PocketChem-tulostin



■ Stylus-kynä
(Säilytetään tulostimessa)



■ Tulostuspapери



■ Käyttöopas
(tämä ohjekirja)

Erikseen ostettavat pakolliset materiaalit

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Virtajohto
- Verkkovirtasovitin

Tulostimen tekniset tiedot

Tulostin	Lämpötulostin
Tulostuspaperi	Värillinen lämpöpaperi (W58 mm × Ø26 mm)
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10-35 °C; kosteus: suhteellinen kosteus 25-85 %
Mittausympäristö	Lämpötila: 10-35 °C; kosteus: suhteellinen kosteus 25-85 %
Säilytysympäristö	Lämpötila: 1-35 °C; kosteus: suhteellinen kosteus 20-85 % (ei tiivistyvä)
Ympäristö kuljetuksen aikana	Lämpötila: -10-60 °C; Kosteus: suhteellinen kosteus 20-85 % (ei tiivistyvä)
Mitat	125 (L) × 133 (S) × 36 (K) mm
Paino	180 g (ilman tulostuspaperia)
Virtalähde	Verkkovirtasovitin 7,5 V 3 A
Virrankulutus	20 W
Käyttö	Yksi kosketus
Liitäntä	Kosketus
Oletettu käyttöikä	Viisi vuotta instrumentin ensimmäisestä käyttökerrasta (asennus) (yrityksen tietojen perusteella)

Käyttöohjeet

Noudata alla olevaa menetelmää, kun liität tulostimen instrumenttiin tai irrotat sen instrumentista.

Tämä käyttöopas käyttää esimerkkinä PocketChem UA:ta (PU-4010).

Katso tarvittaessa lisätietoja PocketChemin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.


HUOMAUTUS: Sammuta virta ja irrota verkkovirtasovitin verkkovirtalähdöstä ennen tulostimen liittämistä tai irrottamista. Muussa tapauksessa instrumentti tai tulostin voi vahingoittua. Tulostin saattaa tulostaa epäselvästi, jos se liitetään tai irrotetaan tahattomasti, kun se on kytkettynä verkkovirtalähtöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tulostimessa olisi jotakin vikaa.

■ Liittäminen

HUOMAUTUS: Tulostin toimii vain verkkovirralla, ei akuilla.


Kun tulostin on liitetty instrumenttiin, kytke instrumentti tulostimen kautta verkkovirtalähtöön.

1. Aseta instrumentti tulostimeen kuvassa näytetyssä kulmassa.
2. Napsauta instrumentti paikoilleen painamalla sen yläosaa.
3. Varmista, että instrumentin ja tulostimen yläosa ovat vaakatasossa toistensa kanssa ja että molemmat yksiköt on lukittu tukevasti toisiinsa.

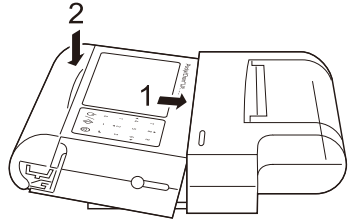

■ Irrottaminen

1. Aseta instrumentti tasaiselle pinnalle (kuten pöydälle).
2. Samalla kun painat näytön yläpuolella olevaa koteloä kohdasta, joka on kohdistettuna näytön keskiosan kanssa (a), nosta lukulaitteen kantta alapuolelta (b).

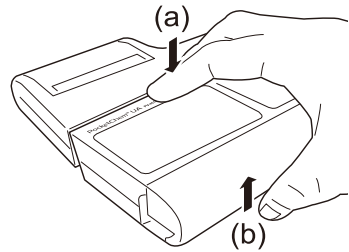

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteys
ARKRAY Europe, B.V. -yhtiöön.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

