

Imprimante PocketChem

Manuel d'instructions

Nous vous remercions d'avoir acheté l'imprimante PocketChem.

Lire très attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.

Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation fourni avec la PocketChem.

Si un incident grave en lien avec le dispositif est survenu ou aurait pu survenir, veuillez en informer directement le fabricant ou le représentant autorisé et votre organisme de réglementation local.

Usage prévu

L'imprimante PocketChem est une imprimante thermique dédiée à être utilisée avec le PocketChem BA (PA-4140) et le PocketChem UA (PU-4010), qui sont destinés à la mesure qualitative, semi-quantitative et/ou quantitative de plusieurs marqueurs physiologiques. Elle est réservée au diagnostic *in vitro* et à un usage professionnel. Cet instrument n'est pas prévu pour pratiquer un test auprès du patient.

Ce produit est conforme à la norme CEM IEC61326-2-6:2012 (EN61326-2-6:2013).

Classe d'émission : CISPR 11 Classe A

Cet instrument est instrument médical de diagnostic *in vitro*.



Ce produit est conforme à la réglementation (EU) 2017/746.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré respecter les limites imposées à un appareil numérique de Classe A, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles produites lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi, peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

L'environnement électromagnétique doit faire l'objet d'une évaluation avant d'utiliser l'appareil. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources de rayonnement électromagnétique intense car elles peuvent perturber son fonctionnement.



L'imprimante doit être directement branchée à l'instrument. Par conséquent, l'imprimante peut également être contaminée par des microorganismes. Être prudent lors du branchement, débranchement et stockage de l'imprimante pour éviter une exposition aux microorganismes.

Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel et sur les étiquettes de l'instrument pour attirer l'attention sur des éléments spécifiques.


■ Pour votre sécurité



Pour éviter l'exposition à des germes pathogènes, respecter les instructions reportées ci-après.

Déballage

L'emballage doit contenir les éléments suivants. Vérifier que tous les éléments soient fournis. Si un élément est manquant ou endommagé, contacter le distributeur.

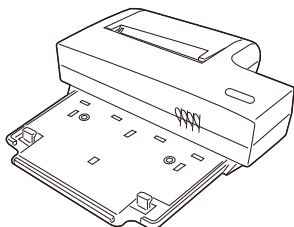

■ Imprimante PocketChem



■ Stylet
(rangé dans l'imprimante)



■ Papier d'impression



■ Manuel d'instructions
(ce manuel)

Matériel requis mais non fourni

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur CA

Spécifications de l'imprimante

Imprimante	Imprimante thermique
Papier d'impression	Papier thermique à haut développement couleur (58 mm de largeur × 26 mm de Ø)
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 35 °C ; Humidité : 25 - 85 % HR
Environnement de mesure	Température : 10 à 35 °C ; Humidité : 25 - 85 % HR
Environnement de stockage	Température : 1 à 35 °C ; Humidité : 20 - 85 % HR (sans condensation)
Environnement pendant le transport	Température : -10 - 60 °C ; Humidité : 20 - 85 % HR (sans condensation)
Dimensions	125 (largeur) × 133 (profondeur) × 36 (hauteur) mm
Poids	180 g (sans papier pour l'imprimante)
Alimentation	Adaptateur CA 7,5 V 3 A
Consommation électrique	20 W
Périphérique	Fixation en un geste
Connexion	Contact
Durée de vie	5 ans à compter de la première utilisation (installation) de l'instrument (selon les données du fabricant)

Pour l'utilisation

Suivre la procédure ci-dessous pour fixer/détacher l'imprimante à/de l'instrument. Ce manuel d'utilisation utilise la PocketChem UA (PU-4010) à titre d'exemple. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation fourni avec la PocketChem.


REMARQUE: Débrancher l'alimentation et débrancher l'adaptateur CA de la prise secteur avant de brancher ou de débrancher l'imprimante. Sinon, l'instrument et l'imprimante risque d'être endommagés. L'imprimante peut présenter des problèmes d'impression si elle est branchée ou débranchée accidentellement lorsqu'elle est branchée à la prise secteur. Toutefois, cela ne signifie pas que l'imprimante est défectueuse.

■ Branchement

REMARQUE: L'imprimante fonctionne uniquement avec du courant alternatif, et non sur pile.


Une fois l'imprimante branchée à l'instrument, brancher l'instrument et l'imprimante sur une prise secteur.

1. Placer l'instrument sur l'imprimante à un angle précis comme illustré.
2. Appuyer sur le haut de l'instrument jusqu'à ce que le clic retentisse.
3. Veiller à ce que le haut de l'instrument et le haut de l'imprimante soient à niveau et fermement fixés.

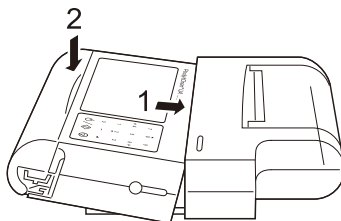

■ Débranchement

1. Placer l'instrument sur une surface plane (un bureau, par exemple).
2. Tout en appuyant sur le boîtier au-dessus de l'affichage en un point aligné avec le centre de l'affichage (a), soulever le boîtier du lecteur d'analyse (b).

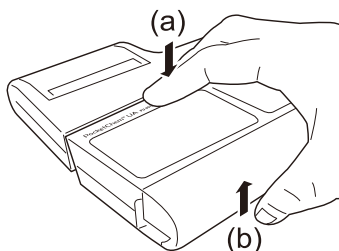

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Pour obtenir une assistance technique,
veuillez contacter ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

