

PocketChem Drucker

Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie den PocketChem Drucker gekauft haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die mit dem PocketChem geliefert wurde.

Wenn es im Zusammenhang mit diesem Gerät zu einem schweren Zwischenfall oder Beinaheunfall gekommen ist, melden Sie dies bitte umgehend dem Hersteller oder dem Bevollmächtigten und Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde.

Verwendungszweck

PocketChem Drucker ist ein spezieller Thermodrucker zur Verwendung mit PocketChem BA (PA-4140) und PocketChem UA (PU-4010), die zur qualitativen und/oder semi-qualitativen Messung mehrerer physiologischer Marker dienen. Nur für die *In-vitro*-Diagnostik und den professionellen Gebrauch. Dieses Gerät ist nicht für patientennahe Tests vorgesehen.

Dieses Produkt entspricht dem EMV-Standard IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013).

Emissionsklasse: CISPR 11 Klasse A.

Dieses Gerät ist ein medizinisches Gerät für die In-Vitro-Diagnostik.



Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2017/746.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden für einen angemessenen Schutz gegen Radiostörstrahlungen entwickelt, um den sicheren Betrieb der Ausrüstung in kommerziellen Umgebungen sicherzustellen. Diese Ausrüstung erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese aussenden. Wenn es nicht entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung installiert und benutzt wird, kann es den Funkempfang stören. Der Betrieb dieser Ausrüstung in Wohngebieten kann Störstrahlungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer auf eigene Kosten geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Störstrahlungen ergreifen.

Die elektromagnetischen Umgebungsbedingungen sollten vor Betrieb des Geräts überprüft werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung, da diese die Funktion des Geräts stören können.



Der Drucker muss direkt am Gerät angebracht sein, damit er benutzt werden kann. Daher kann auch der Drucker mit pathogenen Mikroorganismen kontaminiert sein. Wenden Sie daher beim Anbringen, Abnehmen und Lagern des Druckers Sorgfalt an, um Kontakt mit pathogenen Mikroorganismen zu vermeiden.

Symbole

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch und auf den Etiketten des Geräts verwendet, um Sie auf bestimmte Punkte hinweisen.


■ Für Ihre Sicherheit



Folgen Sie den hier gegebenen Anweisungen, um einen Kontakt mit pathogenen Keimen zu verhindern.

Auspacken

Die Packung sollte die unten aufgeführten Komponenten enthalten. Überprüfen Sie, ob alles vorhanden ist. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, falls etwas fehlen sollte oder beschädigt ist.

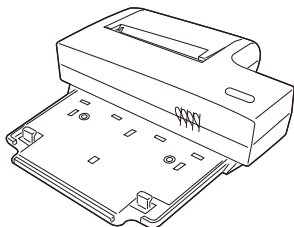

■ PocketChem Drucker



■ Tasterstift
(im Drucker gelagert)



■ Papier



■ Bedienungsanleitung
(diese Anleitung)

Benötigte, aber nicht zur Verfügung gestellte Materialien

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Netzkabel
- Netzteil

Technische Daten des Druckers

Drucker	Thermodrucker
Papier	Farbintensives Thermopapier (B58 mm x Ø26 mm)
Betriebsumgebung	Temperatur: 10-35°C; rel. Luftfeuchtigkeit: 25-85 %
Messumgebung	Temperatur: 10-35°C; rel. Luftfeuchtigkeit: 25-85 %
Lagerumgebung	Temperatur: 1-35°C; rel. Luftfeuchtigkeit: 20-85 % (nicht kondensierend)
Umgebung bei Transport	Temperatur: -10-60°C; Relative Luftfeuchtigkeit: 20-85 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	125 (B) × 133 (T) × 36 (H) mm
Gewicht	180 g (ohne Papier)
Stromversorgung	Netzteil 7,5 V 3 A.
Leistungsaufnahme	20 W
Anschluss	Schnellanschluss
Verbindung	Kontakt
Erwartete Lebensdauer	Fünf Jahre ab der ersten Verwendung (Installation) des Geräts (entsprechend der Firmenunterlagen)

Zur Verwendung

Gehen Sie wie folgt vor, um den Drucker an dem Gerät anzubringen bzw. von ihm abzunehmen.

Die Bedienungsanleitung verwendet den PocketChem UA (PU-4010) als Beispiel.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die mit dem PocketChem geliefert wurde.


HINWEIS: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Drucker anbringen oder abnehmen. Andernfalls können das Gerät und der Drucker beschädigt werden. Wird der Drucker aus Versehen angebracht oder abgenommen, während er mit der Netzsteckdose verbunden ist, so kann er Unsinn drucken. Dies bedeutet aber nicht, dass mit dem Drucker etwas nicht stimmt.

■ So bringen Sie den Drucker an

HINWEIS: Der Drucker kann nur mit Netzspannung und nicht mit Batterien betrieben werden.


Verbinden Sie nach Anbringen des Druckers am Gerät das Gerät durch den Drucker mit einer Netzsteckdose.

1. Stellen Sie das Gerät in dem in der Abbildung gezeigten Winkel auf den Drucker.
2. Drücken Sie auf die Oberseite des Geräts, bis es einrastet.
3. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite des Geräts und der Drucker horizontal auf gleicher Höhe sind und dass beide Geräte fest miteinander verbunden sind.

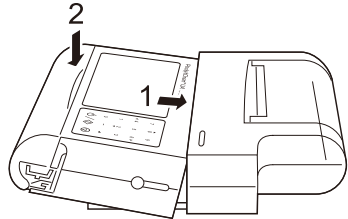

■ So nehmen Sie den Drucker ab

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebenen Fläche (z. B. Schreibtisch).
2. Drücken Sie auf dem Gehäuse über der Anzeige auf einem in der Mittelachse des Displays liegenden Punkt (a) und heben Sie gleichzeitig die Abdeckung der Messeinheit vom Unterteil ab (b).

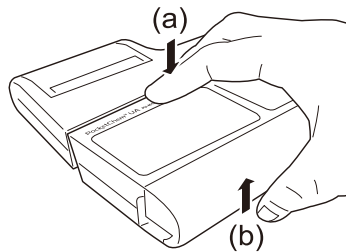

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, wenden
Sie sich bitte an ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

