

Εκτυπωτής PocketChem

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον εκτυπωτή PocketChem.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει το PocketChem.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσατε ή θα μπορούσατε να έχετε αντιμετωπίσει κάποιο συμβάν σχετιζόμενο με τη συσκευή, αναφέρετε το περιστατικό απευθείας στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και την τοπική κανονιστική αρχή.

Ενδεικνυόμενη χρήση

Ο εκτυπωτής PocketChem είναι ένας αποκλειστικός θερμικός εκτυπωτής που χρησιμοποιείται με το PocketChem BA (PA-4140) και το PocketChem UA (PU-4010) και ενδείκνυται για την ποιοτική, ημιποσοτική ή/και ποσοτική μέτρηση διαφόρων φυσιολογικών στοιχείων μέτρησης. Μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro* και επαγγελματική χρήση. Το παρόν όργανο δεν ενδείκνυται για δοκιμή χρήσης κοντά στον ασθενή.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το Πρότυπο περί ΗΜΣ IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013).

Κλάση εκπομπής: CISPR 11 Κλάση A

Το όργανο αυτό είναι ιατρικό όργανο για διαγνωστικές εξετάσεις *in vitro* (IVD).



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΥ) 2017/746.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπισθεί για τις ψηφιακές συσκευές Κλάσης Α, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Τα όρια αυτά έχουν τεθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο χειρισμού, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του παρόντος εξοπλισμού σε κατοικημένες περιοχές είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα.

Το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον πρέπει να αξιολογηθεί πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία.



Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, πρέπει να τον προσαρτήσετε απευθείας στο όργανο. Συνεπώς, είναι δυνατό να μολυνθεί και αυτός με παθογόνους μικροοργανισμούς. Η προσάρτηση, η αφαίρεση και η φύλαξη του εκτυπωτή πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να αποφεύγεται τυχόν έκθεσή του σε παθογόνους μικροοργανισμούς.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο και στις ετικέτες στο παρόν όργανο για να επιστήσουν την προσοχή σας σε συγκεκριμένα στοιχεία.


■ Για την ασφάλειά σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται εδώ για να αποφύγετε την έκθεση σε παθογόνα μικρόβια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία πρέπει να περιέχει τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω. Ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάτι, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.

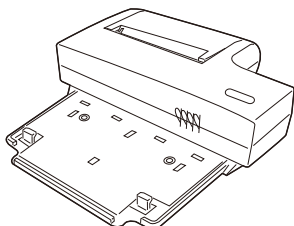

■ Εκτυπωτής PocketChem



■ Γραφίδα
(Είναι αποθηκευμένη μέσα στον εκτυπωτή)



■ Χαρτί εκτυπωτή



■ Εγχειρίδιο λειτουργίας
(αυτό το εγχειρίδιο)

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Προσαρμογέας AC

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής
Χαρτί εκτυπωτή	Χαρτί θερμικού εκτυπωτή για έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας (πλάτος 58 mm × Ø26 mm)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10-35 °C. Υγρασία: Σχετική υγρασία 25-85%
Συνθήκες μέτρησης	Θερμοκρασία: 10-35 °C. Υγρασία: Σχετική υγρασία 25-85%
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: 1-35 °C. Υγρασία: Σχετική υγρασία 20-85% (Χωρίς συμπύκνωση)
Περιβάλλον κατά τη μεταφορά	Θερμοκρασία: -10-60 °C. Υγρασία: Σχετική υγρασία 20-85% (Χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	125 (πλάτος) × 133 (βάθος) × 36 (ύψος) mm
Βάρος	180 g (χωρίς το χαρτί εκτύπωσης)
Τροφοδοσία	Προσαρμογέας AC 7,5 V 3 A
Κατανάλωση ρεύματος	20 W
Προσάρτηση	Προσάρτηση με μία κίνηση
Σύνδεση	Επαφή
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής	5 χρόνια από την πρώτη χρήση (εγκατάσταση) του οργάνου (σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας)

Χρήση

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να προσαρτήσετε/να αφαιρέσετε τον εκτυπωτή στο/από το όργανο.

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το PocketChem UA (PU-4010).


Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει το PocketChem.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού προσαρτήσετε ή αφαιρέσετε τον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε το όργανο και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν δεν πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο όργανο και τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει ακατάληπτα μηνύματα, εάν η προσάρτηση ή η αφαίρεσή του γίνει ενώ είναι συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι υπάρχει πρόβλημα με τον εκτυπωτή.

■ Προσάρτηση του εκτυπωτή


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκτυπωτής λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα, όχι με μπαταρίες.
Αφού προσαρτήσετε τον εκτυπωτή στο όργανο, συνδέστε το όργανο μέσω του εκτυπωτή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

1. Τοποθετήστε το όργανο στον εκτυπωτή υπό γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Πιέστε το επάνω μέρος του οργάνου έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που δηλώνει ότι εφάρμοσε στη θέση του.
3. Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του οργάνου και ο εκτυπωτής βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και ότι οι δύο μονάδες εφαρμόζουν απόλυτα μεταξύ τους.

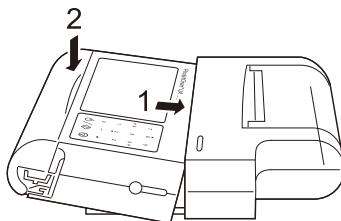

■ Αφαίρεση του εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε το όργανο σε μια επίπεδη επιφάνεια (όπως ένα γραφείο).
2. Πιέζοντας το περίβλημα πάνω από την οθόνη σε σημείο που βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το κέντρο της οθόνης (a), ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας ανάγνωσης από το κάτω μέρος (b).

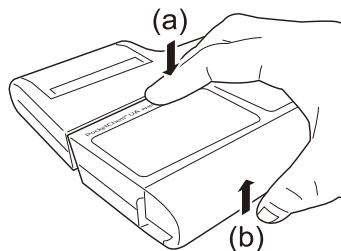

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε
με την ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

