

PocketChem nyomtató

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a PocketChem nyomtatót.

Használat előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót.

További részletekért kérjük, olvassa el a PocketChem készülékhez mellékelt használati útmutatót.

A termék használatával kapcsolatban bekövetkezett vagy potenciális súlyos eseményeket jelenteni kell közvetlenül a gyártónak vagy a hivatalos képviselőn keresztül, valamint a helyi szabályozó hatóságnak.

Felhasználási terület

A PocketChem Printer egy dedikált hőnyomtató a PocketChem BA (PA-4140) és PocketChem UA (PU-4010) készülékekkel való használatra, amelyek számos fiziológiai marker minőségi, félkvantitatív és/vagy kvantitatív mérésére szolgálnak. Csak *in vitro* diagnosztizálási és professzionális felhasználásra. Ez a műszer nem betegközei vizsgálatra szolgál.

Ez a termék megfelel az IEC61326-2-6:2012 (EN61326-2-6:2013) EMC szabványnak.
Kibocsátási osztály: CISPR 11, A osztály
Ez a műszer IVD orvosi műszer.



Ez a termék megfelel a Rendeletnek (EU) 2017/746.

MEGJEGYZÉS: Ez a felszerelés az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az FCC szabályok 15. részében meghatározott A osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek azt a célt szolgálják, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen, amikor a felszerelés kereskedelmi környezetben üzemel. Ez a felszerelés rádiófrekvenciát állít elő, használ és sugározhat, ami a használati útmutatónak nem megfelelő telepítés és használat esetén káros interferenciát okozhat a rádióösszeköttetéseknel. A felszerelés használata lakóövezetben valószínűleg interferenciát okoz. Ilyen esetben a felhasználó köteles saját költségén gondoskodni a probléma elhárításáról.

Az elektromágneses környezetet a készülék működése előtt értékelni kell. Ne használja ezt a készüléket az erős elektromágneses sugárzás forrásainak közvetlen közelében, mivel ezek zavarhatják a megfelelő működést.



A nyomtatót közvetlenül a műszerhez kell csatlakoztatni a használatához. Ezért a nyomtató szintén beszennyeződhet patogén mikroorganizmusokkal. A nyomtató csatlakoztatásakor, levételekor és tárolásakor ügyeljen a patogén mikroorganizmusoknak való kitétség megelőzésére.

Szimbólumok

A következő a kézikönyvben használt szimbólumok és a műszeren található címkéken arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet bizonyos elemekre.


■ Biztonsága érdekében



Kövesse az itt megadott utasításokat a patogén mikrobáknak való kitétség megelőzése érdekében.

Kicsomagolás

A csomagnak tartalmaznia kell a lent felsorolt részegységeket. Ellenőrizze, hogy minden megvan-e. Ha valami hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

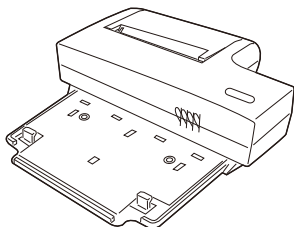

■ PocketChem nyomtató



■ Érintőceruza
(A nyomtatóban tárolva)



■ Nyomtatópapír



■ Használati útmutató
(ez a kézikönyv)

Szükséges, de nem biztosított anyagok

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Tápkábel
- AC-adapter

Nyomtató műszaki adatai

Nyomtató	Hőpapíros nyomtató
Nyomtatópapír	Nagy szinkontrasztú hőpapír (58 mm (Szé) × Ø26 mm)
Működési környezet	Hőmérséklet: 10-35°C; Nedvesség: 25-85% RH
Mérési környezet	Hőmérséklet: 10-35°C; Nedvesség: 25-85% RH
Tárolási környezet	Hőmérséklet: 1-35°C; Nedvesség: 20-85% RH (Nem kondenzáló)
Szállítási környezet	Hőmérséklet: -10-60°C; Páratartalom: 20-85% RH (Nem kondenzáló)
Méretek	125 (Sz) × 133 (Mé) × 36 (Ma) mm
Tömeg	180 g (nyomtatópapír nélkül)
Áramellátás	AC-adapter 7,5 V 3 A
Energiafogyasztás	20 W
Tartozék	Egyérintéses tartozék
Kapcsolódás	Érintkezés
Várható élettartam	5 év a műszer az első használatától (telepítés) (a vállalati adatoknak megfelelően)

Használathoz

A nyomtatonak a műszerhez való csatlakoztatásához / leválasztásához kövesse a következő eljárást.

Ez a kezelési útmutató a PocketChem UA (PU-4010) készüléket használja példaként.

További részletekért kérjük, olvassa el a PocketChem készülékhez mellékelt használati útmutatót.


MEGJEGYZÉS: A nyomtató csatlakoztatása vagy leválasztása előtt kapcsolja ki a műszert, és húzza ki az AC-adaptert az AC aljzatból. Ennek elmulasztása a műszer és a nyomtató károsodását okozhatja. A nyomtató értelmetlen karaktereket nyomtathat, ha véletlenül úgy csatlakoztatják vagy választják le, hogy csatlakoztatva van az AC aljzathoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valami baj van a nyomtatóval.

■ Csatlakoztatás

MEGJEGYZÉS: A nyomtató csak váltóáramról (AC) működik, elemmel nem.


Miután a nyomtató csatlakoztatva van a műszerhez, csatlakoztassa a műszert a nyomtatón keresztül egy AC aljzathoz.

1. Helyezze a műszert a nyomtatóra az ábrán látható szögben.
2. Nyomja a műszer tetejét, hogy a helyére pattanjon.
3. Győződjön meg arról, hogy a műszer teteje és a nyomtató egy szintben van egymáshoz képest, és hogy mindkét egység erősen egymáshoz van rögzítve.

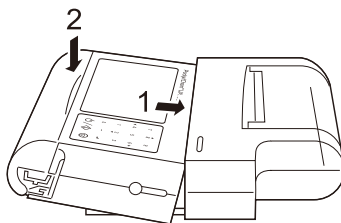

■ Leválasztás

1. Helyezze a műszert egy vízszintes felületre (például egy asztalra).
2. Miközben nyomja a burkolatot a kijelző felett egy a kijelző közepével egy vonalban lévő ponton (a), emelje fel alulról a kiolvasóegység fedelét (b).

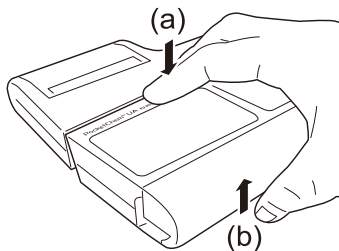

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ha műszaki segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot
az ARKRAY Europe, B.V. vállalattal.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

