

„PocketChem“ spausdintuvas

Naudojimo instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote „PocketChem“ spausdintuvą.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Daugiau informacijos ieškokite prie „PocketChem“ pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Jei patyrėte arba galėsite patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliojimą atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

Numatyta paskirtis

„PocketChem“ spausdintuvas yra šiluminio įrašymo spausdintuvas, sukurtas naudoti su „PocketChem BA“ (PA-4140) ir „PocketChem UA“ (PU-4010), skirtais atlikti kelių fiziologinių šlapimo žymenų kokybinį, pusiau kiekybinį ir (arba) kiekybinį matavimą. Skirtas tik *in vitro* diagnostikai ir profesionalams. Šis instrumentas neskirtas naudoti tyrimui prie paciento lovos.

Šis gaminytis atitinka EMS standartą IEC61326-2-6:2012 (EN61326-2-6:2013).

Taršos klasė: CISPR 11 A klasė

Šis instrumentas yra IVD medicinos instrumentas.



Šis gaminytis atitinka reglamento (EU) 2017/746 reikalavimus.

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka A klasės skaitmeniniam prietaisui taikomus apribojimus, laikantis FCC taisyklių 15 dalies. Šie apribojimai yra skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių naudojant įrangą komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, todėl, jei įrengta ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali trikdyti radijo ryšius. Naudojant šią įrangą gyvenamojoje aplinkoje galimi kenksmingi trikdžiai, kurių atveju naudotojas turės juos pašalinti ir padengti išlaidas.

Prieš naudojant prietaisą reikia įvertinti elektromagnetinę aplinką. Nenaudokite šio prietaiso šalia stiprios elektromagnetinės spinduliuotės, nes ji gali trukdyti tinkamam jo veikimui.



Norint naudoti spausdintuvą, jis turi būti tiesiogiai prijungtas prie instrumento. Todėl spausdintuvas taip pat gali būti užterštas patogeniniais mikroorganizmais. Prijungdami, atjungdami ir laikydami spausdintuvą, būkite atsargūs, kad išvengtumėte patogeninių mikroorganizmų poveikio.

Simboliai

Šioje instrukcijoje ir šio instrumento etiketėse naudojami toliau nurodyti simboliai, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrą informaciją.


■ Dėl jūsų saugumo



Vadovaukitės čia pateiktais nurodymais, kad apsisaugotumėte nuo patogeninių mikrobus.

Išpakavimas

Pakuotėje turi būti toliau išvardyti komponentai. Patikrinkite, ar viskas įtraukta. Jei ko nors trūksta arba kas nors pažeista, susisiekite su savo pardavėju.

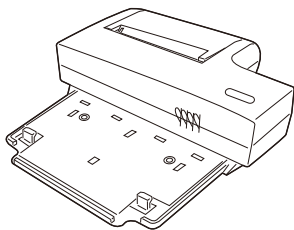

■ „PocketChem“ spausdintuvas



■ „Stylus“ rašiklis
(laikomas spausdintuve)



■ Spausdintuvo popierius



■ Naudojimo instrukcija
(ši instrukcija)

Reikalingos, tačiau nepateiktos medžiagos

- „PocketChem BA PA-4140“
- „PocketChem UA PU-4010“
- Maitinimo laidas
- Kintamosios srovės adapteris

Spausdintuvo specifikacijos

Spausdintuvas	Šiluminio įrašymo spausdintuvas
Spausdintuvo popierius	Aukštos kokybės šiluminis popierius (P58 mm × Ø26 mm)
Darbo aplinka	Temperatūra: 10–35 °C; Drėgmė: 25–85 % SD
Matavimo aplinka	Temperatūra: 10–35 °C; Drėgmė: 25–85 % SD
Laikymo aplinka	Temperatūra: 1–35 °C; Drėgmė: 20–85 % (nesikondensuojanti)
Aplinka transportavimo metu	Temperatūra: -10–60 °C; Drėgmė: 20–85 % (nesikondensuojanti)
Matmenys	125 (P) × 133 (G) × 36 (A) mm
Svoris	180 g (be spausdintuvo popieriaus)
Maitinimo tiekimas	7,5 V 3 A kintamosios srovės adapteris
Energijos sąnaudos	20 W
Prijungimas	Prijungimas vienu paspaudimu
Ryšys	Kontaktas
Numatoma naudojimo trukmė	5 metai nuo instrumento pirmojo panaudojimo (sumontavimo) (pagal įmonės duomenis)

Naudojimas

Norėdami prijungti (arba atjungti) spausdintuvą prie instrumento (arba nuo jo), atlikite šią procedūrą.

Šioje naudojimo instrukcijoje „PocketChem UA“ (PU-4010) naudojamas kaip pavyzdys.

Daugiau informacijos ieškokite prie „PocketChem“ pridėtoje naudojimo instrukcijoje.


PASTABA: Prieš prijungdami arba atjungdami spausdintuvą, išjunkite maitinimą ir atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo kintamosios srovės lizdo. Jei to nepadarysite, galite sugadinti instrumentą ir spausdintuvą. Spausdintuvas gali atspausdinti klaidingai, jei jis netyčia prijungiamas prie arba atjungiamas nuo kintamosios srovės lizdo. Tačiau tai nereiškia spausdintuvo problemos.

■ Prijungimas

PASTABA: Spausdintuvas veikia tik prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, o ne su baterijomis.


Prijungę spausdintuvą prie instrumento, per spausdintuvą prijunkite instrumentą prie kintamosios srovės lizdo.

1. Padėkite instrumentą ant spausdintuvo kampu, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Paspauskite instrumento viršų, kad jis užsifikuotų.
3. Įsitikinkite, kad instrumento ir spausdintuvo viršus yra horizontaliai vienas kito lygyje ir ar abu įrenginiai yra tvirtai pritvirtinti vienas prie kito.

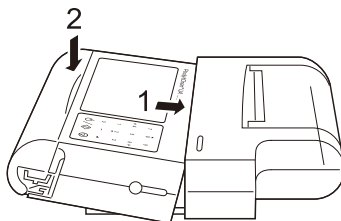

■ Atjungimas

1. Padėkite instrumentą ant lygaus paviršiaus (pvz., stalo).
2. Spausdami virš ekrano esantį korpusą taške, kuris sulygiuotas su ekrano centru (a), pakelkite nuskaitymo bloko gaubtą nuo apačios (b).

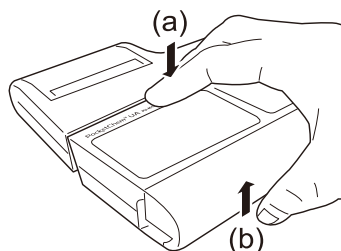

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į
ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

