

Drukarka PocketChem

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup drukarki PocketChem.

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem.

Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do drukarki PocketChem.

W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to producentowi bezpośrednio lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela oraz lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przeznaczenie

Drukarka PocketChem to dedykowana drukarka termiczna do użytku z PocketChem BA (PA-4140) i PocketChem UA (PU-4010), które są przeznaczone do jakościowego, półilościowego i/lub ilościowego pomiaru niektórych markerów fizjologicznych. Przeznaczone wyłącznie do diagnostyki *in vitro* i użytku profesjonalnego. Urządzenie to nie jest przeznaczone do testowania przy pacjencie.

Produkt jest zgodny z normą EMC IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013).

Klasa emisji: CISPR 11 klasa A

Urządzenie to jest wyrobem medycznym IVD.



Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem (EU) 2017/746.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznano je za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, w których to przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

Środowisko elektromagnetyczne należy ocenić przed użyciem urządzenia. Nie używać tego urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ mogą one zakłócać prawidłowe działanie.



Drukarka musi być bezpośrednio podłączona do urządzenia, aby z niej korzystać. Dlatego drukarka również może być skażona mikroorganizmami chorobotwórczymi. Podczas podłączania, odłączania i przechowywania drukarki należy zachować ostrożność, aby zapobiec narażeniu na działanie mikroorganizmów chorobotwórczych.

Symbole

W niniejszej instrukcji i etykietach na tym urządzeniu zastosowano następujące symbole, mające zwrócić uwagę użytkownika na określone elementy.


■ Dla Państwa bezpieczeństwa



Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumencie, aby zapobiec ekspozycji na drobnoustroje chorobotwórcze.

Rozpakowywanie

Opakowanie powinno zawierać elementy wymienione poniżej. Sprawdzić, czy wszystko jest zawarte. Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, należy skontaktować się z dystrybutorem.

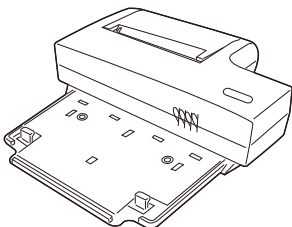

■ Drukarka PocketChem



■ Rysik
(Przechowywany w drukarce)



■ Papier do drukarki



■ Instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja)

Wymagane, ale niedołączone materiały

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Kabel zasilający
- Zasilacz sieciowy

Specyfikacje drukarki

Drukarka	Drukarka termiczna
Papier do drukarki	Papier termiczny o wysokim wybarwieniu kolorów przy wywoływaniu (szer. 58 mm × Ø 26 mm)
Środowisko działania	Temperatura: 10–35°C; Wilgotność: 25–85% wilgotności względnej
Środowisko pomiarowe	Temperatura: 10–35°C; Wilgotność: 25–85% wilgotności względnej
Środowisko przechowywania	Temperatura: 1–35°C; Wilgotność: 20–85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Środowisko podczas transportu	Temperatura: -10–60°C; Wilgotność: 20–85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary	125 (szer.) × 133 (głęb.) × 36 (wys.) mm
Waga	180 g (bez papieru do drukarki)
Zasilanie	Zasilacz sieciowy 7,5 V, 3 A
Pobór mocy	20 W
Mocowanie	Mocowanie za jednym dotknięciem
Połączenie	Kontakt
Przewidywana trwałość	5 lat od pierwszego użycia (instalacji) urządzenia (wg danych firmy)

Do użytku

Postępować według poniższej procedury, aby podłączyć/odłączyć drukarkę do/od urządzenia.

W tej instrukcji obsługi PocketChem UA (PU-4010) służy jako przykład.


Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do drukarki PocketChem.

UWAGA: Wyłączyć zasilanie i odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego przed podłączeniem lub odłączeniem drukarki. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować uszkodzenie urządzenia i drukarki. Drukarka może drukować rzeczy przypadkowe, jeśli zostanie przypadkowo podłączona lub odłączona, gdy jest podłączona do gniazdka sieciowego. Nie oznacza to jednak, że wystąpił jakikolwiek problem z drukarką.

■ Jak podłączyć


UWAGA: Drukarka jest zasilana wyłącznie prądem zmiennym, a nie bateriami. Po podłączeniu drukarki do urządzenia, podłączyć urządzenie przez drukarkę do gniazdka prądu przemiennego.

1. Umieścić urządzenie na drukarce pod kątem, jak pokazano na rysunku.
2. Nacisnąć górną część urządzenia, aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
3. Upewnić się, że górna część urządzenia i drukarki są ustawione poziomo względem siebie i że oba zespoły są mocno ze sobą połączone.

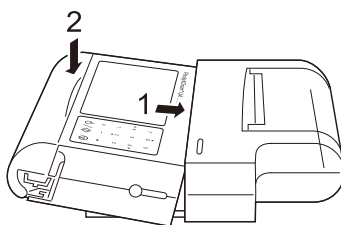

■ Jak odłączyć

1. Umieścić urządzenie na równej powierzchni (takiej jak biurko).
2. Naciskając na obudowę nad wyświetlaczem w punkcie wyrównanym ze środkiem wyświetlacza (a), podnieść pokrywę czytnika od dołu (b).

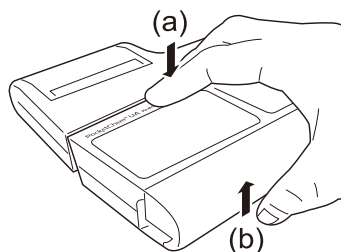

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się z
ARKRAY Europe B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

