

Tlačiareň PocketChem

Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste si kúpili tlačiareň PocketChem.

Pred použitím tlačiarne si dôkladne prečítajte tento návod.

Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu, ktorý bol dodaný s tlačiarňou PocketChem.

Ak došlo alebo mohlo dôjsť k vážnej nehode súvisiacej s touto pomôckou, nahláste to priamo alebo prostredníctvom autorizovaného zástupcu výrobcovi a miestnemu regulačnému úradu.

Zamýšľaný účel

Tlačiareň PocketChem je špecializovaná termálna záznamová tlačiareň na použitie s PocketChem BA (PA-4140) a PocketChem UA (PU-4010), ktoré sú určené na kvalitatívne, semikvantitatívne a/alebo kvantitatívne meranie viacerých fyziologických markerov. Len na diagnostické použitie *in vitro* a profesionálne použitie. Tento prístroj nie je určený na použitie na testovanie v blízkosti pacienta.

Tento produkt je v súlade s normou EMC IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013).

trieda emisií: CISPR 11 trieda A

Tento prístroj je IVD lekársky prístroj.



Tento produkt spĺňa požiadavky Nariadenia (EU) 2017/746.

POZNÁMKA: Toto vybavenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy A podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri prevádzke vybavenia v komerčnom prostredí. Toto vybavenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na obsluhu, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikačného systému. Prevádzka tohto vybavenia v obytnej oblasti môže spôsobiť škodlivé rušenie a v takom prípade bude používateľ povinný odstrániť rušenie na vlastné náklady.

Elektromagnetické prostredie sa má pred prevádzkou prístroja vyhodnotiť. Nepoužívajte tento prístroj v tesnej blízkosti zdrojov silného elektromagnetického žiarenia, pretože tieto môžu rušiť jeho správnu prevádzku.



Tlačiareň musí byť priamo pripojená k prístroju, aby ju bolo možné používať. Preto môže byť tlačiareň kontaminovaná aj patogénnymi mikroorganizmami. Pri pripájaní, odpájaní a skladovaní tlačiarne buďte opatrní, aby ste zabránili vystaveniu patogénnym mikroorganizmom.

Symbols

V tomto návode a na štítkoch na tomto prístroji sú použité nasledujúce symboly, ktoré upozorňujú na konkrétne položky.


■ Pre vašu bezpečnosť



Dodržiavajte tu uvedené pokyny, aby ste zabránili vystaveniu patogénnym mikróbom.

Vybalenie

Balenie by malo obsahovať komponenty uvedené nižšie. Skontrolujte, či sú v ňom všetky položky. Ak niečo chýba alebo je poškodené, kontaktujte svojho distribútora.

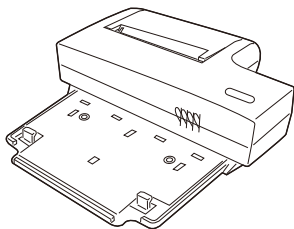

■ Tlačiareň PocketChem



■ Dotykové pero
(uložené v tlačiarň)



■ Papier do tlačiarne



■ Návod na obsluhu
(tento návod)

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou balenia

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Napájací kábel
- AC adaptér

Technické údaje tlačiarne

Tlačiareň	Termálna záznamová tlačiareň
Papier do tlačiarne	Vysokofarebný termálny papier (Š58 mm × Ø26 mm)
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 – 35 °C; Vlhkosť: 25 – 85 % rel. vlhkosť
Meracie prostredie	Teplota: 10 – 35 °C; Vlhkosť: 25 – 85 % rel. vlhkosť
Skladovacie prostredie	Teplota: 1 – 35 °C; Vlhkosť: 20 – 85 % rel. vlhkosť (bez kondenzácie)
Prostredie počas prepravy	Teplota: -10 – 60 °C; Vlhkosť: 20 – 85 % rel. vlhkosť (bez kondenzácie)
Rozmery	125 (Š) × 133 (H) × 36 (V) mm
Hmotnosť	180 g (bez papiera do tlačiarne)
Napájací zdroj	AC adaptér 7,5 V 3 A
Spotreba energie	20 W
Pripojenie	Pripojenie jedným dotykom
Prepojenie	Kontaktné
Očakávaná životnosť	5 rokov od prvého použitia (inštalácie) prístroja (podľa údajov spoločnosti)

Používanie

Na pripojenie/odpojenie tlačiarne k prístroju/od prístroja použite nižšie uvedený postup.

V tomto návode na obsluhu sa ako príklad používa PocketChem UA (PU-4010).


Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu, ktorý bol dodaný s tlačiarňou PocketChem.

POZNÁMKA: Pred pripojením alebo odpojením tlačiarne vypnite napájanie a odpojte AC adaptér od sieťovej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja a tlačiarne. Ak sa tlačiareň náhodne pripojí alebo odpojí, keď je pripojená k sieťovej zásuvke, tlačiareň môže tlačiť nezmysly. To však neznamená, že s tlačiarňou je nejaký problém.

■ Ako pripojiť


POZNÁMKA: Tlačiareň funguje len na napájanie striedavým prúdom, nie z batérií.
Po pripojení tlačiarne k prístroju pripojte prístroj k zásuvke striedavého prúdu prostredníctvom tlačiarne.

1. Umiestnite prístroj na tlačiareň pod uhlom, ako je znázornené na obrázku.
2. Zatlačením na hornú časť prístroja ho zacvaknete na miesto.
3. Uistite sa, že horná časť prístroja a tlačiarne sú vo vodorovnej rovine a že obe jednotky sú navzájom pevne zaistené.

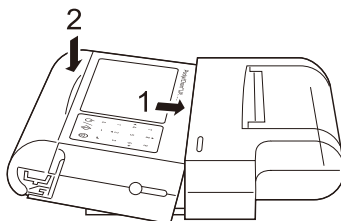

■ Ako odpojiť

1. Prístroj položte na rovný povrch (napríklad na stôl).
2. Stlačte kryt nad displejom v bode na úrovni stredu displeja (a) a zároveň zdvihnite kryt odčítacej jednotky zo spodnej strany (b).

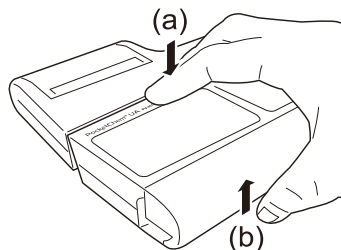

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Pokiaľ potrebujete technickú podporu, kontaktujte
ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

