

Tiskalnik PocketChem

Priročnik za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika PocketChem.

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za uporabo, ki je priložen analizatorju PocketChem.

Če je prišlo ali bi lahko prišlo do resnega zapleta, povezanega s pripomočkom, o tem obvestite neposredno izdelovalca ali pooblaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

Predvideni namen

Tiskalnik PocketChem je namenski termični tiskalnik za uporabo z analizatorjema PocketChem BA (PA-4140) in PocketChem UA (PU-4010), ki sta namenjena kvalitativnemu, semikvantitativnemu in/ali kvantitativnemu merjenju različnih fizioloških markerjev. Samo za *in vitro* diagnostično in profesionalno uporabo. Ta instrument ni namenjen za testiranje v bližini pacienta.

Ta izdelek je skladen s standardom EMC IEC61326-2-6:2012 (EN61326-2-6:2013).

Emisijski razred: CISPR 11, razred A

Ta instrument je medicinski pripomoček IVD.



Ta izdelek je skladen z Uredbo (EU) 2017/746.

OPOMBA: Ta oprema je preizkušena in skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda A v skladu s 15. delom pravil komisije FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami pri uporabi opreme v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena oziroma se ne uporablja v skladu z navodili za uporabo, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Če se ta oprema uporablja v stanovanjskem okolju, bo verjetno povzročila škodljive motnje. Te motnje mora uporabnik odpraviti na lastne stroške.

Pred uporabo naprave je treba ovrednotiti elektromagnetno okolje. Ne uporabljajte te naprave v neposredni bližini virov močnega elektromagnetnega sevanja, ker lahko motijo pravilno delovanje.



Tiskalnik mora biti nameščen neposredno na instrument, da ga lahko uporabljate. Tudi tiskalnik se zato lahko kontaminira s patogenimi mikroorganizmi. Pri nameščanju, odstranjevanju in shranjevanju tiskalnika bodite previdni, da preprečite izpostavljenost patogenim mikroorganizmom.

Simboli

Naslednji simboli v tem priročniku in na nalepkah na tem instrumentu vas opozarjajo na pomembne informacije.


■ Za vašo varnost



Upoštevajte tukaj navedena navodila, da preprečite izpostavljenost patogenim mikrobom.

Razpakiranje

Paket mora vsebovati spodaj navedene sestavne dele. Preverite, ali je vse priloženo. Če kar koli manjka ali je poškodovano, se obrnite na distributerja.

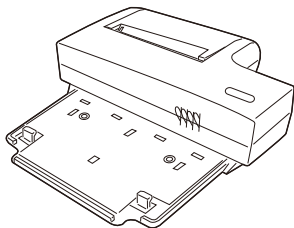

■ Tiskalnik PocketChem



■ Pisalo
(shranjeno v tiskalniku)



■ Tiskalni papir



■ Priročnik za uporabo
(ta priročnik)

Materiali, ki so potrebni, vendar niso priloženi

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Napajalni kabel
- Omrežni napajalnik

Specifikacije tiskalnika

Tiskalnik	Termični tiskalnik
Tiskalni papir	Termični papir z veliko zmožnostjo obarvanja (Š 58 mm × Ø26 mm)
Delovno okolje	Temperatura: 10–35 °C; vlažnost: 25–85 % (relativna)
Merilno okolje	Temperatura: 10–35 °C; vlažnost: 25–85 % (relativna)
Okolje za skladiščenje	Temperatura: 1–35 °C; vlažnost: 20–85 % (relativna, brez kondenzacije)
Okolje med prevozom	Temperatura: –10–60 °C Vlažnost: 20–85 % (relativna, brez kondenzacije)
Mere	125 (Š) × 133 (G) × 36 (V) mm
Teža	180 g (brez tiskalnega papirja)
Električno napajanje	Omrežni napajalnik, 7,5 V/3 A
Poraba energije	20 W
Namestitev	Namestitev z enim dotikom
Povezava	Stik
Pričakovana življenjska doba	5 let od prve uporabe (namestitve) instrumenta (glede na podatke podjetja)

Uporaba

Za namestitev/odstranitev tiskalnika na/z instrumenta upoštevajte spodnji postopek. V tem priročniku za uporabo je kot primer uporabljen analizator PocketChem UA (PU-4010).

Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za uporabo, ki je priložen analizatorju PocketChem.


OPOMBA: Pred namestitvijo ali odstranitvijo tiskalnika izklopite napajanje in odklopite omrežni napajalnik iz omrežne vtičnice. Če tega ne naredite, lahko pride do poškodb instrumenta in tiskalnika. Tiskalnik lahko natisne nesmiselno vsebino, če ga pomotoma namestite ali odstranite, medtem ko je priključen v omrežno vtičnico. To pa ne pomeni, da je s tiskalnikom nekaj narobe.

■ Postopek namestitve

OPOMBA: Tiskalnik deluje samo na omrežno napajanje, ne na baterije.


Ko je tiskalnik nameščen na instrument, priključite instrument prek tiskalnika v omrežno vtičnico.

1. Postavite instrument na tiskalnik pod kotom, kot je prikazano na sliki.
2. Pritisnite na vrh instrumenta, tako da se zaskoči.
3. Poskrbite, da sta zgornja dela instrumenta in tiskalnika vodoravno poravnana in da sta obe enoti trdno pritrjeni druga na drugo.

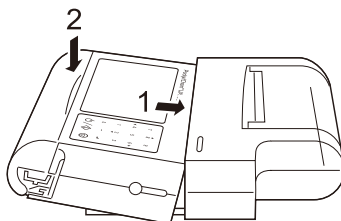

■ Postopek odstranitve

1. Postavite instrument na ravno površino (na primer na mizo).
2. Medtem ko pritiskate na ohišje nad zaslonom na točki, ki je poravnana s sredino zaslona (a), dvignite pokrov bralne enote od spodaj (b).

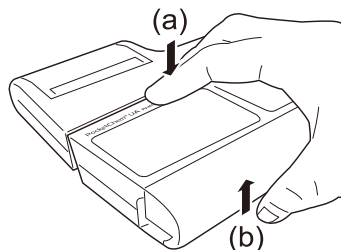

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Če potrebujete tehnično pomoč, se obrnite na
ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

