

Cuvette (heparin)

Před použitím si přečtěte návod k obsluze přístroje. Pokud došlo nebo mohlo dojít k vážné nehodě související s tímto prostředkem, nahlaste to přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce výrobci a místnímu regulačnímu úřadu.

Zamýšlený účel

Cuvette (heparin) je speciální nádoba na vzorek plné krve pro použití s přístroji SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) a SpotChem EL 2 (SE-1530), které jsou určeny pro kvantitativní měření několika fyziologických markerů. Pouze pro *in vitro* diagnostické použití a profesionální použití.

Varování a předběžná opatření


- Pouze pro *in vitro* diagnostické použití.
- Při manipulaci s klinickými vzorky a analytickými nástroji dbejte zvýšené opatření. Správně zlikvidujte biologicky nebezpečný odpad. Podrobné pokyny naleznete v návodu k obsluze přístroje.
- Nepoužívejte opakovaně.

Popis produktu

Tato zkumavka na vzorky obsahuje heparin jako antikoagulans a používá se s plnou krví a pro separaci plazmy.

Pokyny

1. Do zkumavky nalijte 530 μ l čerstvé odebrané plné krve.
2. Pevně uzavřete a 5 až 6krát opatrně obraťte, aby se vše promíchalo.
3. Při měření vzorků plné krve (elektrolyty): Odstraňte uzávěr a ihned změřte.
4. Při měření vzorků plazmy (biochemie): Po odstředění sejměte uzávěr a ihned změřte.

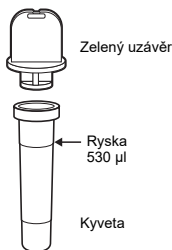

Upozornění

1. Při manipulaci se vzorky používejte vhodné ochranné pomůcky, například jednorázové rukavice.
2. Opatrně otevřete uzávěr a dávejte pozor, abyste nerozptýlili krystaly pokrývající vnitřní povrch zkumavky. Jedná se o heparin lithný používaný jako antikoagulans.
3. Nepoužívejte zkumavky na vzorky, které nejsou uzavřené. Pokud je zelený uzávěr nebo kyveta poškozená, zkumavku na vzorky nepoužívejte.
4. Skladujte na tmavém místě, chraňte před vlhkostí a přímým slunečním světlem.
5. Zkumavka na vzorek není sterilizována.
6. Zkumavka na vzorek není určena ke skladování vzorků.
7. Tuto zkumavku na vzorek nepoužívejte k měření plné krve odebrané do zkumavek obsahujících antikoagulant.
8. Při měření elektrolytů (Na, K, Cl), neodstředějte; měřte s plnou krví. Výsledkem měření odstředěné plazmy mohou být nízké hodnoty K a Na a vysoké hodnoty Cl.

Skladování a stabilita

Składujte při 2–30 °C (36–86 °F)
Zkumavky na vzorek lze používat do data expirace uvedeného na obalu.

Dodané materiály

Následující položky jsou dodávány v následujících množstvích.

- Cuvette (heparin): 500 ks
500 kyvet
500 zelený uzávěr
- Cuvette (heparin): 100 ks
100 kyvet
100 zelený uzávěr

Vyžadované, nedodané materiály

Měření vyžaduje také další spotřební materiál. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přístroje.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Pokud potřebujete technickou podporu,
kontaktujte ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

