

Cuvette (heparin)

Használat előtt olvassa el a készülék kezelői kézikönyvét. A termék használatával kapcsolatban bekövetkezett vagy potenciális súlyos eseményeket jelenteni kell közvetlenül a gyártónak vagy a hivatalos képviselőn keresztül, valamint a helyi szabályozó hatóságoknak.

Rendeltetésszerű cél

A Cuvette (heparin) egy dedikált teljes vérmintatartály a SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) és SpotChem EL 2 (SE-1530) készülékekkel való használatra, amelyek számos élettani marker mennyiségi mérésére szolgálnak. Csak *in vitro* diagnosztikai és professzionális felhasználásra.

Figyelmeztetések és óvintézkedések


- Csak *in vitro* diagnosztikai felhasználásra.
- A klinikai minták és az analitikai eszközök kezelése során fokozott óvatossággal járjon el. A biológiailag veszélyes hulladékot megfelelően ártalmatlanítsa. A részletes utasításokért lásd a készülék kezelői kézikönyvét.
- Ne használja fel újra.

Termékleírás

Ez a mintacső heparint tartalmaz véralvadástgátlóként, és teljes vérrrel, valamint plazma elválasztáshoz használható.

Használati utasítás

1. Öntsön 530 µL frissen gyűjtött teljes vért a mintacsőbe.
2. Szorosan zárja össze, és óvatosan fordítsa meg 5-6 alkalommal, hogy összekeveredjen.
3. Teljes vérminták (elektrolitok) mérésekor:
Távolítsa el a kupakot, és azonnal végezze el a mérést.
4. Plazmaminták mérésekor (biokémia):
A centrifugálás után vegye le a kupakot, és azonnal végezze el a mérést.

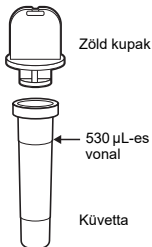

Figyelem

1. A minták kezelése előtt viseljen megfelelő védőfelszerelést, például eldobható kesztyűt.
2. Óvatosan nyissa fel a kupakot, ügyelve arra, hogy a mintacső belső felületét borító kristályok ne szóródjanak szét. Ez a véralvadástgátlóként használt lítiumheparin.
3. Ne használjon olyan mintacsöveket, amelyek nincsenek kupakkal lezárva. Ne használja a mintacsövet, ha a zöld kupak vagy a küvetta sérült.
4. Tárolja sötét helyen, nem páras és közvetlen napfénytől védett helyen.
5. A mintacső nincs sterilizálva.
6. A mintacső nem a minták tárolására szolgál.
7. Ne használja ezt a mintacsövet véralvadástgátlót tartalmazó mintacsövekben gyűjtött teljes vér méréseire.
8. Az elektrolitok (Na, K, Cl) mérésekor ne centrifugáljon; mérjen teljes vérrrel. A centrifugált plazma mérése alacsony K- és Na-értékeket és magas Cl-értékeket eredményezhet.

Tárolás is stabilitás

2 - 30 °C (36 - 86 °F) hőmérsékleten tárolandó
A mintacsövek a csomagoláson feltüntetett lejárati dátumig használhatók.

Biztosított anyagok

A következő tételek a következő mennyiségben vannak biztosítva.

- Cuvette (heparin): 500 darab
500 küvetta
500 zöld kupak
- Cuvette (heparin): 100 darab
100 küvetta
100 zöld kupak

Szükséges, de nem biztosított anyagok

A méréshez egyéb fogyóeszközökre is szükség van. A részleteket lásd a készülék kezelői kézikönyvében.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ha műszaki segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az ARKRAY Europe, B.V. vállalattal.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

