

Cuvette (heparin)

Leggere il manuale operativo dello strumento prima dell'uso. Qualora si fosse verificato o si sarebbe potuto verificare un incidente grave correlato al dispositivo, si prega di segnalarlo direttamente al fabbricante o, tramite il rappresentante autorizzato, all'autorità di regolamentazione locale.

Destinazione d'uso

- ✦ La Cuvette (heparin) è un contenitore per i campioni di sangue intero per l'uso con il sistema SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820) e SpotChem D-Concept 2c (SD-4830) e SpotChem D-Concept 2e (SD-4840), destinato alla determinazione quantitativa di diversi marcatori fisiologici. Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro* e professionale.

Avvertenze e precauzioni


- Destinato solo alla diagnostica *in vitro*.
- Prestare la massima attenzione durante la manipolazione di campioni clinici e strumenti analitici. Smaltire correttamente i rifiuti a rischio biologico. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale operativo dello strumento.
- Non riutilizzare.

Descrizione prodotto

Questa provetta contiene eparina come anticoagulante e viene utilizzata con sangue intero e per la separazione del plasma.

Istruzioni

- 1) Versare 530 µL di sangue intero appena prelevato nella provetta.
- 2) Richiudere bene e capovolgere delicatamente 5 o 6 volte per mescolare.
- 3) Quando si misurano campioni di sangue intero (elettroliti): rimuovere il tappo e misurare immediatamente.
- 4) Quando si misurano campioni di plasma (biochimica): dopo la centrifugazione, rimuovere il tappo e misurare immediatamente.

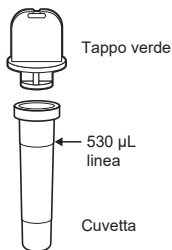

Precauzioni

- 1) Prima di maneggiare i campioni, indossare dispositivi di protezione appropriati, ad es., guanti monouso.
- 2) Aprire delicatamente il tappo, prestando attenzione a non disperdere i cristalli che rivestono la superficie interna della provetta. Sono di litio eparina, usata come anticoagulante.
- 3) Non usare provette che non siano tappate. Non utilizzare la provetta se il tappo verde o la cuvette sono danneggiati.
- 4) Conservare in un luogo buio al riparo dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
- 5) La provetta non è sterilizzata.
- 6) La provetta non è destinata alla conservazione dei campioni.
- 7) Non utilizzare questa provetta per analizzare il sangue intero prelevato in provette contenenti anticoagulante.
- 8) Quando si misurano gli elettroliti (Na, K, Cl), non centrifugare; utilizzare sangue intero per l'analisi. L'analisi del plasma centrifugato può produrre valori bassi per K e Na, e valori alti per Cl.

Conservazione e stabilità

Conservare a 2 - 30 °C (36 - 86 °F)

Le provette possono essere utilizzate fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Materiali forniti

I seguenti articoli sono forniti nelle seguenti quantità.

- Cuvette (heparin): 500 pz
500 cuvette
500 tappi verdi
- Cuvette (heparin): 100 pz
100 cuvette
100 tappi verdi

Materiali necessari ma non forniti

L'analisi richiede anche altri materiali. Per maggiori dettagli, vedere il manuale operativo dello strumento.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Se si necessita di assistenza tecnica,
contattare ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

