

Cuvette (heparin)

Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo vadovą. Jei patyrėte arba galėjote patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliotąjį atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

Numatytoji paskirtis

„Cuvette (heparin)“ yra speciali viso kraujo mėginio talpykla, skirta naudoti su „SPOTCHEM D-Concept“ (SD-4810, SD-4820), „SpotChem D-Concept 2c“ (SD-4830), „SpotChem D-Concept 2e“ (SD-4840) ir „SpotChem EL 2“ (SE-1530), skirtais kelių fiziologinių žymenų kiekybiniam matavimui atlikti. Skirta tik *in vitro* diagnostikai ir profesionalams.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės


- Skirta tik *in vitro* diagnostikai.
- Būkite ypač atsargūs tvarkydami klinišnius mėginius ir analitines priemones. Tinkamai utilizuokite biologinį pavojų keliančias atliekas. Išsamias instrukcijas rasite prietaiso naudojimo vadove.
- Negalima naudoti pakartotinai.

Gaminio aprašymas

Šiame mėgintuvėlyje kaip antikoagulianto yra heparino, jis naudojamas su visu krauju ir plazmai atskirti.

Nurodymai

1. Supilkite 530 µL šviežiai surinkto viso kraujo į mėgintuvėlį.
2. Sandariai uždarykite ir švelniai apverskite 5–6 kartus, kad sumaišytumėte.
3. Matuodami viso kraujo mėginius (elektrolitai): nuimkite dangtelį ir išmatuokite nedelsiant.
4. Matuodami plazmos mėginius (biochemija): po centrifugavimo nuimkite dangtelį ir išmatuokite nedelsiant.

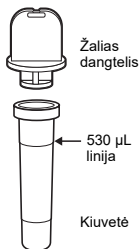

Perspėjimai

1. Prieš tvarkydami mėginius, užsidėkite tinkamas apsaugines priemones, pvz., vienkartinės pirštines.
2. Švelniai atidarykite dangtelį, stengdamiesi neišbarstyti kristalų, dengiančių vidinį mėgintuvėlio paviršių. Jie yra ličio heparinas, naudojamas kaip antikoaguliantas.
3. Nenaudokite mėgintuvėlių, kurie nėra uždengti dangteliais. Nenaudokite mėgintuvėlio, jei žalias dangtelis ar kiuvetė yra pažeisti.
4. Laikykite tamsioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
5. Mėgintuvėlis nėra sterilizuotas.
6. Mėgintuvėlis nėra skirtas mėginiams laikyti.
7. Nenaudokite šio mėgintuvėlio visam kraujui, surinktam mėgintuvėliuose su antikoaguliantu, matuoti.
8. Matuodami elektrolitus (Na, K, Cl), nacentrifuguokite; matuokite su visu krauju. Centrifugotos plazmos matavimas gali lemti mažas K ir Na reikšmes bei dideles Cl reikšmes.

Laikymas ir stabilumas

Laikykite 2–30 °C (36–86 °F) temperatūroje. Mėgintuvėlius galima naudoti iki ant pakuotės nurodytos galiojimo pabaigos datos.

Pateiktos medžiagos

Šie elementai pateikiami toliau nurodytais kiekiais.

- Cuvette (heparin): 500 vnt.
500 kiuvečių
500 žalias dangtelis
- Cuvette (heparin): 100 vnt.
100 kiuvečių
100 žalias dangtelis

Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos

Matuojant taip pat reikalingos kitos sunaudojamos medžiagos. Išsamesnės informacijos rasite prietaiso naudojimo vadove.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į
ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

