

Cuvette (heparin)

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia. W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to producentowi bezpośrednio lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela oraz lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przewidziane zastosowanie

Kuweta Cuvette (heparin) to pojemnik na próbkę krwi pełnej przeznaczony do użytku z urządzeniami SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) i SpotChem EL 2 (SE-1530), które służą do pomiaru ilościowego określonych markerów fizjologicznych. Wyłącznie do diagnostyki *in vitro* i do użytku profesjonalnego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności


- Wyłącznie do diagnostyki *in vitro*.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z próbkami klinicznymi i narzędziami analitycznymi. Należy usuwać odpady stwarzające zagrożenie biologiczne w prawidłowy sposób. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja użytkowania urządzenia.
- Nie używać ponownie.

Opis produktu

Probówka ta zawiera heparynę jako antykoagulant i jest przeznaczona do stosowania z próbkami krwi pełnej oraz do oddzielania osocza.

Instrukcje

1. Wlać do próbki 530 µl świeżo pobranej krwi pełnej.
2. Dokładnie założyć zatyczkę i delikatnie odwrócić 5–6 razy w celu wymieszania.
3. W przypadku pomiaru próbek krwi pełnej (elektrolyty): Zdjąć zatyczkę i niezwłocznie wykonać pomiar.
4. W przypadku pomiaru próbek osocza (biochemia): Po odwirowaniu zdjąć zatyczkę i niezwłocznie wykonać pomiar.

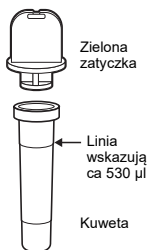

Przestrogi

1. Podczas wykonywania czynności związanych z próbkami należy stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak jednorazowe rękawiczki.
2. Należy ostrożnie zdejmować zatyczkę, uważając, aby nie doszło do rozsypania kryształków pokrywających wewnętrzną powierzchnię próbki. Jest to heparyna litowa stosowana jako antykoagulant.
3. Nie należy używać próbek bez założonych zatyczek. Nie należy używać próbki, jeśli zielona zatyczka lub kuweta są uszkodzone.
4. Przechowywać w ciemnym miejscu bez narażenia na wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne.
5. Probówka nie jest sterylizowana.
6. Probówka nie jest przeznaczona do przechowywania próbek.
7. Nie używać tej próbki do pomiaru krwi pełnej pobranej do próbek zawierających antykoagulant.
8. W przypadku pomiaru poziomu elektrolitów (Na, K, Cl) nie odwirowywać; wykonać pomiar krwi pełnej. W wynikach pomiaru odwirowanego osocza wartości K i Na mogą być zaniżone, a wartości Cl — zawyżone.

Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 2–30 °C (36–86 °F).
 Probówek można używać do daty ważności wskazanej na opakowaniu.

Dostarczane materiały

Poniższe materiały są dostarczane we wskazanych ilościach.

- Cuvette (heparin): 500 szt.
 500 kuwet
 500 zielona zatyczka
- Cuvette (heparin): 100 szt.
 100 kuwet
 100 zielona zatyczka

Materiały wymagane, ale niedostarczane

Do wykonania pomiaru wymagane są także inne materiały eksploatacyjne. Szczegóły zawiera instrukcja użytkowania urządzenia.



ARKRAY Factory, Inc.
 1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
 Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
 Prof. J.H. Bavincklaan 2
 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
 Jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną,
 skontaktuj się z ARKRAY Europe B.V.
 TEL: +31-20-545-24-50
 FAX: +31-20-545-24-59

