

Cuvette (heparin)

Citiți manualul de utilizare pentru instrument, înainte de utilizare. Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să îl raportați direct producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității dvs. locale de reglementare.

Scop preconizat

Cuvette (heparin) este un recipient dedicat pentru probe de sânge integral care se utilizează cu SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) și SpotChem EL 2 (SE-1530), conceput pentru măsurarea cantitativă a mai multor markeri fiziologici. Numai pentru diagnosticare *in vitro* și uz profesional.

Avertismente și precauții


- Numai pentru diagnosticare *in vitro*.
- Aveți extrem de multă grijă la manipularea probelor clinice și a instrumentelor de analiză. Eliminați în mod corespunzător deșeurile biologice periculoase. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- Nu reutilizați.

Descrierea produsului

Această eprubetă pentru probă conține heparină folosită ca anticoagulant și este folosită pentru sânge integral și pentru separarea plasmiei.

Instrucțiuni

1. Turnați 530 μ L de sânge integral proaspăt colectat în eprubeta pentru probă.
2. Puneți capacul înapoi și strângeți, apoi amestecați, răsturnând eprubeta ușor de 5 până la 6 ori.
3. La măsurarea probelor de sânge integral (electroliti): Scoateți capacul și măsurați imediat.
4. La măsurarea probelor de plasmă (biochimie): După centrifugare, scoateți capacul și măsurați imediat.

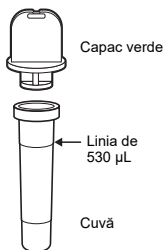

Atenție

1. Înainte de a manipula probele, purtați echipament de protecție adecvat, de ex., mănuși de unică folosință.
2. Deschideți ușor capacul, având grijă să nu răspândiți cristalele care acoperă suprafața interioară a eprubetei pentru probă. Acestea sunt heparină de litiu, folosită ca anticoagulant.
3. Nu folosiți eprubetele pentru probă fără capac. Nu folosiți eprubeta pentru probă în cazul în care capacul verde sau cuva sunt deteriorate.
4. Depozitați într-un loc întunecat, evitând umiditatea și lumina directă a soarelui.
5. Eprubeta pentru probă nu este sterilizată.
6. Eprubeta pentru probă nu este concepută pentru depozitarea specimenelor.
7. Nu folosiți această eprubetă pentru probă pentru a măsura sângele integral colectat în eprubete pentru probă care conțin anticoagulant.
8. Când măsurați electroliti (Na, K, Cl), nu centrifugați; măsurați cu sânge integral. Măsurarea plasmiei centrifugate poate conduce la valori reduse pentru K și Na și la valori ridicate pentru Cl.

Depozitare și stabilitate

Depozitați la 2 - 30 °C (36 - 86 °F)

Eprubetele pentru probă pot fi utilizate până la data expirării imprimate pe ambalaj.

Materiale furnizate

Următoarele materiale sunt furnizate în următoarele cantități.

- Cuvette (heparin): 500 buc.
500 de cuve
500 capac verde
- Cuvette (heparin): 100 buc.
100 de cuve
100 capac verde

Materiale necesare, care nu sunt furnizate

Măsurarea necesită și alte materiale consumabile. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al instrumentului.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Dacă aveți nevoie de asistență tehnică,
contactați ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

