

Cuvette (heparin)

Läs bruksanvisningen för instrumentet före användning. Om du har varit med om eller hade kunnat vara med om ett allvarligt tillbud i samband med enheten ska detta rapporteras direkt till tillverkaren eller via det auktoriserade representanten och till den lokala tillsynsmyndigheten.

Avsedd användning

Cuvette (heparin) är en särskild behållare för blodprov för användning med SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) och SpotChem EL 2 (SE-1530), som är avsedd för kvantitativ mätning av flera fysiologiska markörer. Endast för *in vitro*-diagnostisk och professionell användning.

Varningar och försiktighetsåtgärder


- Endast för *in vitro*-diagnostisk användning.
- Var extra försiktig vid hantering av kliniska prover och analysverktyg. Kassera biofarligt avfall på rätt sätt. Detaljerade instruktioner finns i bruksanvisningen för instrumentet.
- Får inte återanvändas.

Produktbeskrivning

Detta provrör innehåller heparin som antikoagulant och används med helblod och för plasmaseparation.

Anvisningar

1. Håll 530 µL av det nydragna helblodet i provröret.
2. Fäst locket ordentligt och vänd försiktigt 5 till 6 gånger för att blanda det.
3. Vid mätning av blodprover (elektrolyter): Ta av locket och mät omedelbart.
4. Vid mätning av plasmaprover (biokemi): Efter centrifugering, ta av locket och mät omedelbart.

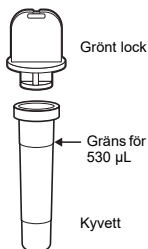

Försiktighetsåtgärder

1. Använd lämplig skyddsutrustning, som engångshandskar, när du hanterar proverna.
2. Öppna försiktigt locket och se till att inte sprida kristallerna som täcker provrörets inre yta. De består av litiumheparin som används som antikoagulantia.
3. Använd inte provrör som inte har lock. Använd inte provröret om det gröna locket eller kyvetten är skadade.
4. Förvara på en mörk plats som inte är utsatt för fukt eller direkt solljus.
5. Provröret är inte steriliserat.
6. Provröret är inte avsett för förvaring av prover.
7. Använd inte detta provrör för att mäta blod som samlats in i provrör som innehåller antikoaguleringsmedel.
8. Vid mätning av elektrolyter (Na, K, Cl), centrifugera inte; mät med helblod. Mätning av centrifugerad plasma kan resultera i låga värden för K och Na och höga värden för Cl.

Lagring och stabilitet

Förvaras i 2–30 °C (36–86 °F)
Provrören kan användas fram till det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medföljande material

Följande artiklar medföljer i följande kvantiteter.

- Cuvette (heparin): 500 st
500 kyvetter
500 grönt lock
- Cuvette (heparin): 100 st
100 kyvetter
100 grönt lock

Material som krävs men inte medföljer

Mätningen kräver även andra förbrukningsvaror. Mer information finns i bruksanvisningen för instrumentet.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakta ARKRAY Europe, B.V. om du behöver teknisk hjälp.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

