

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Před použitím si přečtěte návod k obsluze přístroje. Pokud došlo nebo mohlo dojít k vážné nehodě související s tímto prostředkem, nahláste to přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce výrobce a místnímu regulačnímu úřadu.

Zamýšlený účel

Centrifuge Cup (for D-Concept) je speciální nádoba na vzorky plné krve pro použití s přístroji SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) a SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), která je určena pro kvantitativní měření několika fyziologických markerů. Pouze pro *in vitro* diagnostické použití a profesionální použití.

Varování a předběžná opatření


- Pouze pro *in vitro* diagnostické použití.
- Při manipulaci s klinickými vzorky a analytickými nástroji dbejte zvýšené opatření. Správné zlikvidujte biologicky nebezpečný odpad. Podrobné pokyny naleznete v návodu k obsluze přístroje.
- Nepoužívejte opakovaně.

Popis produktu

Tato zkumavka na vzorky obsahuje heparin jako antikoagulant a používá se k oddělení plazmy od plné krve.

Pokyny

- Do zkumavky na vzorek nalijte 495 µl – 565 µl čerstvé odebrané plné krve.
- Pevně uzavřete a 5 až 6krát opatrně obraťte, aby se vše promíchalo.
- Odstraňte uzávěr a ihned vložte zkumavku na vzorek do vnitřní odstředivky přístroje k měření.

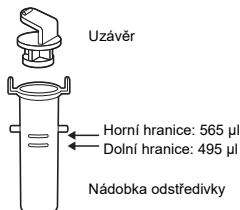

Upozornění

- Při manipulaci se vzorky používejte vhodné ochranné pomůcky, například jednorázové rukavice.
- Opatrně otevírejte uzávěr a dávejte pozor, abyste nerozptýlili krystaly pokrývající vnitřní povrch zkumavky. Jedná se o heparin lithný používaný jako antikoagulant.
- Nepoužívejte zkumavky na vzorky, které nejsou uzavřené. Pokud jsou uzávěr nebo nádoba odstředivky poškozeny, zkumavku na vzorek nepoužívejte.
- Skladujte na tmavém místě, chraňte před vlhkostí a přímým slunečním světlem.
- Zkumavka na vzorek není sterilizována.
- Zkumavka na vzorek není určena ke skladování vzorků.
- Tuto zkumavku na vzorek nepoužívejte k měření plné krve odebrané do zkumavek obsahujících antikoagulant.

Skladování a stabilita

Skladujte při 2–30 °C (36–86 °F)

Zkumavky na vzorek lze používat do data expirace uvedeného na obalu.

Dodané materiály

Následující položky jsou dodávány v následujících množstvích.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 ks
100 nádobek odstředivky
100 uzávěrů

Vyžadované, nedodané materiály

Měření vyžaduje také další spotřební materiál. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přístroje.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Pokud potřebujete technickou podporu,
kontaktujte ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

