

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Leggere il manuale operativo dello strumento prima dell'uso. Qualora si fosse verificato o si sarebbe potuto verificare un incidente grave correlato al dispositivo, si prega di segnalarlo direttamente al fabbricante o, tramite il rappresentante autorizzato, all'autorità di regolamentazione locale.

Destinazione d'uso

- Il Centrifuge Cup (for D-Concept) è un contenitore per la centrifugazione di campioni di sangue intero per l'uso con il sistema SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) e SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), destinato alla determinazione quantitativa di diversi marcatori fisiologici. Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro* e professionale.

Avvertenze e precauzioni


- Destinato solo alla diagnostica *in vitro*.
- Prestare la massima attenzione durante la manipolazione di campioni clinici e strumenti analitici. Smaltire correttamente i rifiuti a rischio biologico. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale operativo dello strumento.
- Non riutilizzare.

Descrizione prodotto

Questa provetta contiene eparina come anticoagulante ed è utilizzata per separare il plasma dal sangue intero.

Istruzioni

- Versare 495 μ L - 565 μ L di sangue intero appena prelevato nella provetta.
- Richiudere bene e capovolgere delicatamente 5 o 6 volte per mescolare.
- Rimuovere il tappo e collocare immediatamente la provetta del campione nella centrifuga interna dello strumento per l'analisi.

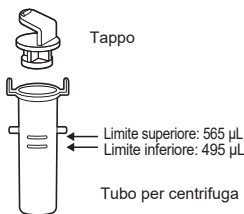

Precauzioni

- Prima di maneggiare i campioni, indossare dispositivi di protezione appropriati, ad es., guanti monouso.
- Aprire delicatamente il tappo, prestando attenzione a non disperdere i cristalli che rivestono la superficie interna della provetta. Sono di litio eparina, usata come anticoagulante.
- Non usare provette che non siano tappate. Non utilizzare la provetta se il tappo o il tubo per centrifuga sono danneggiati.
- Conservare in un luogo buio al riparo dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
- La provetta non è sterilizzata.
- La provetta non è destinata alla conservazione dei campioni.
- Non utilizzare questa provetta per analizzare il sangue intero prelevato in provette contenenti anticoagulante.

Conservazione e stabilità

Conservare a 2 - 30 °C (36 - 86 °F)

Le provette possono essere utilizzate fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Materiali forniti

I seguenti articoli sono forniti nelle seguenti quantità.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 pz
- 100 tubi per centrifuga
- 100 tappi

Materiali necessari ma non forniti

L'analisi richiede anche altri materiali. Per maggiori dettagli, vedere il manuale operativo dello strumento.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Se si necessita di assistenza tecnica,

contattare ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

