

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia. W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to producentowi bezpośrednio lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela oraz lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przewidziane zastosowanie

Kubeczek Centrifuge Cup (for D-Concept) to pojemnik na próbkę krwi pełnej przeznaczony do użytku z urządzeniami SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) i SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), które służą do pomiaru ilościowego określonych markerów fizjologicznych. Wyłącznie do diagnostyki *in vitro* i do użytku profesjonalnego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności


- Wyłącznie do diagnostyki *in vitro*.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z próbkami klinicznymi i narzędziami analitycznymi. Należy usuwać odpady stwarzające zagrożenie biologiczne w prawidłowy sposób. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja użytkowania urządzenia.
- Nie używać ponownie.

Opis produktu

Probówka ta zawiera heparynę jako antykoagulant i jest przeznaczona do oddzielania osocza z krwi pełnej.

Instrukcje

1. Wlać do próbki 495–565 µl świeżo pobranej krwi pełnej.
2. Dokładnie założyć zatyczkę i delikatnie odwrócić 5–6 razy w celu wymieszania.
3. Zdjąć zatyczkę i natychmiast umieścić próbkę w wirówce wewnętrznej urządzenia w celu wykonania pomiaru.

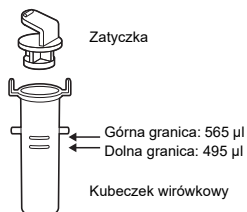

Przestrogi

1. Podczas wykonywania czynności związanych z próbkami należy stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak jednorazowe rękawiczki.
2. Należy ostrożnie zdejmować zatyczkę, uważając, aby nie doszło do rozsiania kryształków pokrywających powierzchnię próbki. Jest to heparyna litowa stosowana jako antykoagulant.
3. Nie należy używać próbek bez założonych zatyczek. Nie należy używać próbki, jeśli zatyczka lub kubeczek wirówkowy są uszkodzone.
4. Przechowywać w ciemnym miejscu bez narażenia na wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne.
5. Probówka nie jest sterylizowana.
6. Probówka nie jest przeznaczona do przechowywania próbek.
7. Nie używać tej próbki do pomiaru krwi pełnej pobranej do próbek zawierających antykoagulant.

Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 2–30 °C (36–86 °F). Probówek można używać do daty ważności wskazanej na opakowaniu.

Dostarczane materiały

- Poniższe materiały są dostarczane we wskazanych ilościach.
- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 szt.
100 kubeczków wirówkowych
100 zatyczek

Materiały wymagane, ale niedostarczane

Do wykonania pomiaru wymagane są także inne materiały eksploatacyjne. Szczegóły zawiera instrukcja użytkowania urządzenia.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną,
skontaktuj się z ARKRAY Europe B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

