

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Ler o manual de instruções do instrumento antes de o utilizar. Se sofreu ou esteve perto de sofrer um incidente grave relacionado com o dispositivo, comunique a situação diretamente ao fabricante ou ao representante autorizado e à autoridade reguladora local.

Finalidade prevista

- ✦ O Centrifuge Cup (for D-Concept) é um recipiente de amostra para sangue total destinado a ser utilizado com o SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) e SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), cuja finalidade é a análise quantitativa de vários marcadores fisiológicos. Apenas para diagnóstico *in vitro* e utilização profissional.

Advertências e precauções


- Apenas para diagnóstico *in vitro*.
- Tomar cuidados adicionais ao manusear amostras clínicas e ferramentas de análise. Eliminar adequadamente resíduos biológicos perigosos. Para obter instruções pormenorizadas, consultar o manual de instruções do instrumento.
- Não reutilizar.

Descrição do produto

Este tubo de amostra contém heparina como anticoagulante e é utilizado para separação do plasma do sangue total.

Instruções

1. Verter 495 µL - 565 µL do sangue total acabado de colher no tubo de amostra.
2. Voltar a colocar a tampa com firmeza e inverter suavemente 5 a 6 vezes para misturar.
3. Remover a tampa e colocar imediatamente o tubo de amostra na centrífuga interna do instrumento para realizar a análise.

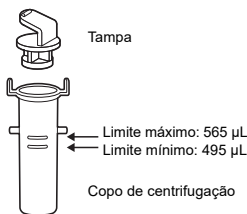

Cuidados

1. Antes de manusear amostras, colocar equipamento de proteção adequado, como luvas descartáveis.
2. Abrir suavemente a tampa, com cuidado para não espalhar os cristais que revestem a superfície interna do tubo de amostra. Estes são feitos de heparina de lítio que é usada como anticoagulante.
3. Não utilizar tubos de amostra sem tampa. Não utilizar o tubo de amostra se a tampa ou o copo de centrifugação estiverem danificados.
4. Armazenar num local escuro, evitando humidade e luz solar direta.
5. O tubo de amostra não está esterilizado.
6. O tubo de amostra não se destina ao armazenamento de espécimes.
7. Não utilizar este tubo de amostra para analisar sangue total colhido em tubos de amostra que contenham anticoagulante.

Armazenamento e estabilidade

Armazenar a 2 - 30°C (36 - 86°F)

Os tubos de amostra podem ser utilizados até a data de validade indicada na embalagem.

Materiais fornecidos

São fornecidos os seguintes itens nas quantidades indicadas.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 pçs
- 100 copos de centrifugação
- 100 tampas

Materiais necessários, mas não fornecidos

A análise também requer outros consumíveis. Para obter informações pormenorizadas, consultar o manual de instruções do instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Se precisar de obter assistência técnica,
contacte a ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

