

Whole Blood Sample Tube

Lue instrumentin käyttöohje ennen käyttöä. Jos sinulla on ollut tai olisi voinut olla laitteeseen liittyvä vakava vaaratilanne, ilmoita siitä suoraan valmistajalle, valtuutetulle edustajalle tai paikalliselle säädantöviranomaiselle.

Käyttötarkoitus

Whole Blood Sample Tube on erillinen kokoverinäytteen säiliö, joka on tarkoitettu käytettäväksi useiden fysiologisten markkereiden kvantitatiiviseen mittaukseen käytettävien SPOTCHEM EZ (SP-4430)- ja SPOTCHEM EL (SE-1520) -laitteiden kanssa. Vain *in vitro* -diagnostiikkaan ja ammattikäyttöön.

Varoitukset ja varotoimet


- Vain *in vitro* -diagnostiikkaan.
- Käsittele klinisiä näytteitä ja analyysityökaluja erityisen huolellisesti. Hävitä biologisen vaaran aiheuttava jätte asianmukaisesti. Katso yksityiskohtaiset ohjeet instrumentin käyttöohjeesta.
- Ei saa käyttää uudelleen.

Tuotteen kuvaus

Tätä hepariinia antikoagulanttina sisältävää näyteputkea käytetään kokoveren ja veriplasman erottamiseen.

Käyttöohjeet

- Plasmanäytteiden mittaaminen (biokemia - SPOTCHEM EZ)
 - Kaada 250-500 µL tuoretta kokoverta näyteputkeen.
 - Tulppaa uudelleen tiukasti ja sekoita kääntämällä hellävaroen ympäri 5-6 kertaa.
 - Linkouksen jälkeen poista tulppa ja tee mittaus välittömästi.
- Kokoverinäytteiden mittaaminen (elektrolyytit - SPOTCHEM EL)
 - Kaada 500 µL tuoretta kokoverta näyteputkeen.
 - Tulppaa uudelleen tiukasti ja sekoita kääntämällä hellävaroen ympäri 5-6 kertaa.
 - Irrota tulppa ja tee mittaus välittömästi.

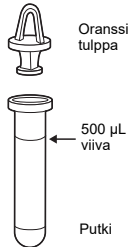

Huomautukset

- Pue ennen näytteiden käsittelyä asianmukaiset suojavarusteet, kuten kertakäyttöhanskat.
- Avaa tulppa varovasti ja varo, etteivät näyteputken sisäpinnalla olevat pinnoitteet hajoa. Ne ovat antikoagulanttina käytettyä litiumhepariinia.
- Älä käytä tulppaamattomia näyteputkia. Älä käytä näyteputkea, jos oranssi tulppa tai putki on vaurioitunut.
- Säilytä pimeässä suojassa kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
- Näyteputkea ei ole steriloitu.
- Näyteputkea ei ole tarkoitettu näytteiden säilyttämiseen.
- Älä käytä tätä näyteputkea antikoagulanttia sisältäviin näyteputkiin kerätyn kokoveren mittaamiseen.
- Elektrolyyttejä (Na, K, Cl) mitattaessa älä linkoa näytettä vaan tee mittaus kokoverestä. Lingotun plasman mittaus voi tuottaa alhaisia K- ja Na-arvoja ja korkeita Cl-arvoja.

Säilyttäminen ja vakaus

Säilytyslämpötila on 2-30°C (36-86°F)
Näyteputkia voi käyttää pakkauksessa ilmoitettuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

Mukana toimitettavat materiaalit

Pakkaus sisältää seuraavia tuotteita seuraavat määrät.

- Whole Blood Sample Tube: 500 kpl
 - 500 putkea
 - 500 oranssia tulppaa
- Whole Blood Sample Tube: 100 kpl
 - 100 putkea
 - 100 oranssia tulppaa

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta mukana

Mittaukseen tarvitaan muita kulutusosia. Katso yksityiskohtaiset tiedot instrumentin käyttöohjeesta.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteys

ARKRAY Europe, B.V. -yhtiöön.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

