

Whole Blood Sample Tube

Prieš naudodami perskaitykite prietaiso naudojimo vadovą. Jei patyrėte arba galėjote patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliotąjį atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

Numatyta paskirtis

Whole Blood Sample Tube yra speciali kraujo mėginių talpyklė, skirta naudoti su SPOTCHEM EZ (SP-4430) ir SPOTCHEM EL (SE-1520), skirtais keliems fiziologiniams žymenims kiekybiškai nustatyti. Tik *in vitro* diagnostikai ir naudoti specialistams.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės


- Tik *in vitro* diagnostikai.
- Būkite ypač atsargūs tvarkydami klininius mėginius ir analizės priemones. Tinkamai utilizuokite biologiškai pavojingas atliekas. Išsamias instrukcijas rasite instrumento naudojimo vadove.
- Nenaudokite pakartotinai.

Gaminio aprašymas

Šiame mėgintuvėlyje yra heparino, kuris yra antikoaguliantas ir naudojamas su visos sudėties krauju bei plazmai atskirti.

Nurodymai

- Tiriant plazmos mėginius (SPOTCHEM EZ biochemija)
 1. Į mėgintuvėlį įpilkite 250-500 μ l ką tik paimto visos sudėties kraujo.
 2. Sandariai uždenkite ir švelniai pavartykite 5 iki 6 kartus, kad susimaišytų.
 3. Po centrifugavimo nuimkite dangtelį ir nedelsdami ištyrkite.
- Tiriant visos sudėties kraujo mėginius (elektrolitus SPOTCHEM EL)
 1. Į mėgintuvėlį įpilkite 500 μ l ką tik paimto visos sudėties kraujo.
 2. Sandariai uždenkite ir švelniai pavartykite 5 iki 6 kartus, kad susimaišytų.
 3. Nuimkite dangtelį ir nedelsdami ištyrkite.

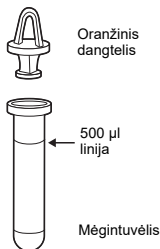

Įspėjimai

1. Prieš tvarkydami mėginius, dėvėkite tinkamas apsaugines priemones, pvz., vienkartines pirštines.
2. Švelniai atidarykite dangtelį, stengdamiesi, kad neišsisklaidytų kristalai, dengiantys vidinį mėginio mėgintuvėlio paviršių. Jie yra ličio heparinas, naudojamas kaip antikoaguliantas.
3. Nenaudokite neuždengtų mėgintuvėlių. Nenaudokite mėginio mėgintuvėlio, jei oranžinis dangtelis arba mėgintuvėlis yra pažeisti.
4. Laikyti tamsioje vietoje, saugant nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
5. Mėginio mėgintuvėlis nėra sterilizuotas.
6. Mėginio mėgintuvėlis nėra skirtas mėginiams laikyti.
7. Nenaudokite šio mėgintuvėlio viso sudėties kraujui, surinktam mėgintuvėliuose, kuriuose yra antikoagulantų, tirti.
8. Tirdami elektrolitus (Na, K, Cl), necentrifuguokite; tirkite visos sudėties kraują. Tiriant centrifuguotą plazmą, K ir Na vertės gali būti mažos, o Cl – didelės.

Sandėliavimas ir stabilumas

Laikyti 2-30°C (36-86°F) temperatūroje
Mėginių mėgintuvėliai gali būti naudojami iki galiojimo datos, nurodytos ant pakuočių.

Komplekte esančios medžiagos

Komplekte yra toliau nurodyti šių elementų kiekiai.

- Whole Blood Sample Tube: 500 vnt.
500 mėgintuvėlių
500 oranžinių dangtelių
- Whole Blood Sample Tube: 100 vnt.
100 mėgintuvėlių
100 oranžinių dangtelių

Reikalingos medžiagos, kurių nėra komplekte

Tiriant reikia ir kitų vartojamųjų reikmenų. Išsamesnės informacijos ieškokite įrenginio naudojimo vadove.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į

ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

