

Whole Blood Sample Tube

Przed użyciem produktu należy przeczytać instrukcję użytkowania analizatora. W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia poważnego incydentu związanego z urządzeniem należy zgłosić to producentowi bezpośrednio lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela oraz lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Przewidziane zastosowanie

Whole Blood Sample Tube to specjalny pojemnik na próbkę krwi pełnej przeznaczony do użytku z analizatorem SPOTCHEM EZ (SP-4430) i analizatorem SPOTCHEM EL (SE-1520) w celu ilościowego pomiaru wielu markerów fizjologicznych. Wyłącznie do diagnostyki *in vitro* i do użytku profesjonalnego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności


- Wyłącznie do diagnostyki *in vitro*.
- Podczas pracy z próbkami klinicznymi i narzędziami analitycznymi należy zachować szczególną ostrożność. Należy w odpowiedni sposób usuwać odpady stwarzające zagrożenie biologiczne. Szczegółowe instrukcje zawiera instrukcja użytkowania analizatora.
- Nie używać ponownie.

Opis produktu

Ta próbówka na próbkę zawiera antykoagulant w postaci heparyny i jest wykorzystywana jako pojemnik na próbkę krwi pełnej oraz do oddzielania osocza.

Wskazówki dotyczące użycia

- Pomiar próbek osocza (testy biochemiczne w analizatorze SPOTCHEM EZ)
 1. Przebrać 250-500 µl świeżo pobranej krwi pełnej do próbówki na próbkę.
 2. Dobrze zamknąć próbówkę zatyczką i delikatnie odwrócić próbówkę od 5 do 6 razy w celu wymieszania jej zawartości.
 3. Po odwirowaniu zdjąć zatyczkę i bezzwłocznie wykonać pomiar.
- Pomiar próbek krwi pełnej (pomiar elektrolitów w analizatorze SPOTCHEM EL)
 1. Przebrać 500 µl świeżo pobranej krwi pełnej do próbówki na próbkę.
 2. Dobrze zamknąć próbówkę zatyczką i delikatnie odwrócić próbówkę od 5 do 6 razy w celu wymieszania jej zawartości.
 3. Zdjąć zatyczkę i bezzwłocznie wykonać pomiar.

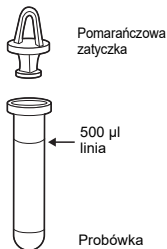

Przestrogi

1. Przed rozpoczęciem pracy z próbkami należy założyć odpowiednie środki ochrony osobistej np. jednorazowe rękawiczki.
2. Należy delikatnie zdejmować zatyczkę, uważając, aby nie rozsypać kryształków pokrywających wewnętrzną powierzchnię próbek na próbkę. Są to kryształki heparyny litowej wykorzystywanej jako antykoagulant.
3. Nie wolno używać próbek na próbki, które nie mają założonych zatyczek. Nie wolno używać próbówki na próbkę w przypadku uszkodzeń pomarańczowej zatyczki lub próbówki.
4. Przechowywać w ciemnym miejscu; chronić przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
5. Probówka na próbkę nie jest sterylna.
6. Probówka na próbkę nie jest przeznaczona do przechowywania próbek.
7. Nie wolno używać tej próbówki na próbkę do pomiaru krwi pełnej zebranej do próbówki zawierającej antykoagulant.

8. W przypadku wykonywania pomiarów elektrolitów (Na, K, Cl) nie należy wrować zawartości próbek; pomiar należy wykonywać na krwi pełnej. Wykonanie pomiarów na odwirowanym osoczu może doprowadzić do uzyskania niskich wartości jonów K i Na oraz wysokich wartości jonów Cl.

Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 2-30°C (36-86°F)

Próbówek na próbki można używać do daty ważności wskazanej na opakowaniu.

Dostarczane materiały

Wymienione poniżej elementy są dostarczane we wskazanych ilościach.

- Whole Blood Sample Tube: 500 szt.
500 próbek
500 pomarańczowych zatyczek
- Whole Blood Sample Tube: 100 szt.
100 próbek
100 pomarańczowych zatyczek

Materiały wymagane, ale niedostarczane

Do wykonania pomiaru wymagane są również inne materiały eksploatacyjne. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja użytkowania analizatora.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną,

skontaktuj się z ARKRAY Europe B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

