

Whole Blood Sample Tube

Läs instrumentets driftsmanual innan användning. Om du har varit med om eller hade kunnat vara med om ett allvarligt tillbud i samband med enheten ska detta rapporteras direkt till tillverkaren eller via det auktoriserade representanten och till den lokala tillsynsmyndigheten.

Avsett ändamål

Whole Blood Sample Tube är en särskild provbehållare för helblod för användning med SPOTCHEM EZ (SP-4430) och SPOTCHEM EL (SE-1520) som är avsedd för den kvantitativa mätningen av flera fysiologiska markörer. Endast för användning vid *in vitro*-diagnostik och professionell användning.

Varningar och försiktighetsåtgärder


- Endast för användning vid *in vitro*-diagnostik.
- Var extra noggrann vid hantering av kliniska prover och analytiska verktyg. Avlägsna farligt biologisk avfall ordentligt. För detaljerade instruktioner, se instrumentets driftsmanual.
- Återanvänd inte.

Produktbeskrivning

Detta provrör innehåller heparin som antikoagulant och används för separation av helblod och plasma.

Instruktioner

- Vid mätning av plasmaprover (biokemi för SPOTCHEM EZ)
 1. Håll 250 - 500 µL av det nyligen insamlade helblodet i provröret.
 2. Sätt på locket ordentligt och invertera försiktigt 5 till 6 gånger för att blanda.
 3. Efter centrifugering, avlägsna locket och mät omedelbart.
- Vid mätning av helblodsprover (elektrolyter för SPOTCHEM EL)
 1. Håll 500 µL av det nyligen insamlade helblodet i provröret.
 2. Sätt på locket ordentligt och invertera försiktigt 5 till 6 gånger för att blanda.
 3. Avlägsna locket och mät omedelbart.

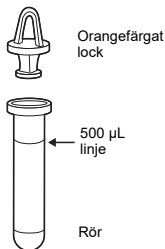

Försiktighetsåtgärder

1. Använd lämplig skyddsutrustning som till exempel engångshandskar innan hantering av prover.
2. Öppna försiktigt locket och se till att inte sprida ut kristallerna som täcker provrörets insida. De är litium-heparin och används som antikoagulanter.
3. Använd inte provrör som saknar lock. Använd inte provrör om det orangefärgade locket eller röret är skadat.
4. Förvara på en mörk plats som inte utsätts för fukt eller direkt solljus.
5. Provröret är inte steriliserat.
6. Provröret är inte avsett för lagring av prover.
7. Använd inte provröret för att mäta helblod insamlat i provrör som innehåller antikoagulanter.
8. Vid mätning av elektrolyter (Na, K, Cl), centrifugera inte; mät med helblod. Mätning av centrifugerad plasma kan resultera i låga värden för K och Na och höga värden för Cl.

Lagring och stabilitet

Lagra vid 2 - 30°C (36 - 86°F)
Provrör kan användas fram till utgångsdatumet som visas på förpackningen.

Material som tillhandahålls

Följande saker tillhandahålls i följande mängder.

- Whole Blood Sample Tube: 500 st
500 rör
500 orangefärgade lock
- Whole Blood Sample Tube: 100 st
100 rör
100 orangefärgade lock

Material som krävs men som inte tillhandahålls

Mätning kräver också andra förbrukningsartiklar. För detaljer, se instrumentets driftsmanual.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Kontakta ARKRAY Europe, B.V. om du behöver teknisk hjälp.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

