

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Lue instrumentin käyttöohje ennen käyttöä. Jos sinulla on ollut tai olisi voinut olla laitteeseen liittyvä vakava vaaratilanne, ilmoita siitä suoraan valmistajalle, valtuutetulle edustajalle tai paikalliselle säädäntöviranomaiselle.

Käyttötarkoitus

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) on erillinen kokoverinäytteen säiliö, joka on tarkoitettu käytettäväksi useiden fysiologisten markkereiden kvantitatiiviseen mittaukseen käytettävän SPOTCHEM EZ (SP-4430) -laitteen kanssa. Vain *in vitro* -diagnostiikkaan ja ammattikäyttöön.

Varoitukset ja varotoimet


- Vain *in vitro* -diagnostiikkaan.
- Käsittele klinisiä näytteitä ja analyysityökaluja erityisen huolellisesti. Hävitä biologisen vaaran aiheuttava jäte asianmukaisesti. Katso yksityiskohtaiset ohjeet instrumentin käyttöohjeesta.
- Ei saa käyttää uudelleen.

Tuotteen kuvaus

Tätä hepariinia antikoagulanttina sisältävää näyteputkea käytetään plasman erottamiseen kokoverestä.

Käyttöohjeet

1. Kaada 250 µL tuoretta kokovertä näyteputkeen.
2. Tulppaa uudelleen tiukasti ja sekoita kääntämällä hellävaroen ympäri 5-6 kertaa.
3. Irrota tulppa ja aseta näyteputki välittömästi instrumentin sisäiseen linkoon mittausta varten.

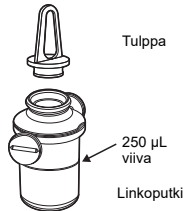

Huomautukset

1. Pue ennen näytteiden käsittelyä asianmukaiset suojavarusteet, kuten kertakäyttöhanskat.
2. Avaa tulppa varovasti ja varo, etteivät näyteputken sisäpinnalla olevat pinnoitekiteet hajoa. Ne ovat antikoagulanttina käytettyä litiumhepariinia.
3. Älä käytä tulppaamattomia näyteputkia. Älä käytä näyteputkea, jos sen tulppa tai linkoputki on vaurioitunut.
4. Säilytä pimeässä suojassa kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
5. Näyteputkea ei ole steriloitu.
6. Näyteputkea ei ole tarkoitettu näytteiden säilyttämiseen.
7. Älä käytä tätä näyteputkea muuta antikoagulanttia kuin hepariinia sisältäviin näyteputkiin kerätyn kokoveren mittaamiseen.

Säilyttäminen ja vakaus

Säilytyslämpötila on 2-30°C (36-86°F)

Näyteputkia voi käyttää pakkauksessa ilmoitettuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

Mukana toimitettavat materiaalit

Pakkaus sisältää seuraavia tuotteita seuraavat määrät.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 kpl
- 100 linkoputkea
- 100 tulppaa

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta mukana

Mittaukseen tarvitaan muita kulutusosia. Katso yksityiskohtaiset tiedot instrumentin käyttöohjeesta.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteys

ARKRAY Europe, B.V. -yhtiöön.

TEL:+31-20-545-24-50

FAX:+31-20-545-24-59

